


## Ką daryti, jeigu...

### Pasigirdus įspėjimo signalui:

 Nutildyti įspėjimo signalą (jei reikia)


Nustatyti priežastį ir imtis atitinkamų veiksmų

 Išjungti įspėjimo signalą  Tęsti maitinimą

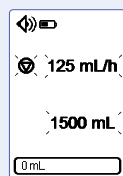


Priminimas dėl „Start“

Atlikti sekantį veiksmą arba išjungti pompą.

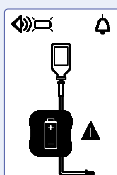


Išsekusi baterija

Nedelsiant jungti pompą į maitinimo tinklą.

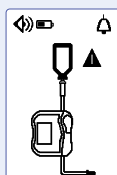


Įspėjimas dėl tuščio maišelio / oro patekimo į sistemą

Pakeisti konteinerį ir sistemą arba patikrinti, ar nėra oro burbuliukų.

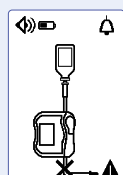


Įspėjimas dėl galimo užsikimšimo apatinėje dalyje

Patikrinti, ar pompos sistema / maitinimo vamzdelis neužsikimšęs už pompos paciento pusėje.

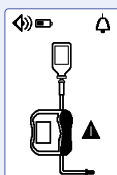


Įspėjimas dėl atviros angos

Uždaryti pompos angą.

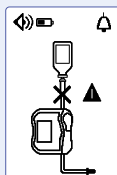


Įspėjimas dėl galimo užsikimšimo viršutinėje dalyje

Patikrinti, ar neužsikimšusi pompos sistema tarp konteinerio ir pompos.

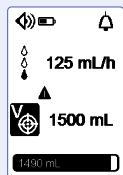


Pranešimas, kad reikiamas kiekis beveik pasiektas

Tęsti arba baigti maitinimą.

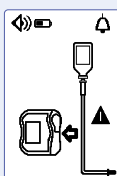


Įspėjimas dėl tiekimo sistemos prijungimo

Patikrinti sistemos padėtį virš pompos mechanizmo ir po juo, ir tinkamai ją prijungti.

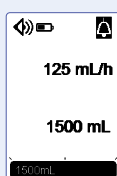

Reikiamas kiekis pasiekė įspėjimo signalo žymą

Baigti maitinimą.

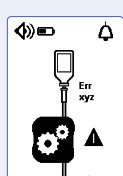

Įspėjimas dėl pompos veikimo klaidos

Pasižymėti techninės klaidos kodą (Err xyz) ir kreiptis į vietos biomedicinos skyrių.



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

# Amika®

## ENTERINIO MAITINIMO POMPA

## ILIUSTRUOTAS NAUDOJIMO VADOVAS



DĖL BET KOKIŲ KLAUSIMŲ AR INFORMACIJOS SKAMBINKITE 24 VALANDAS PER PARĄ VEIKIANČIU „HOMECARE“ NEMOKAMU PAGALBOS LINIJOS TEL. NR. 0808 100 1990



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Limited,  
Cestrian Court, Eastgate Way,  
Manor Park, Runcorn,  
Cheshire WA7 1NT  
tel: 01928 533533 fax: 01928 533520  
email: scientific.affairsUK@fresenius-kabi.com  
www.fresenius-kabi.com/gb  
Parengta: 2018 m. kovas EN01046

Amika® yra įmonės „Fresenius Kabi AG“ registruotasis prekės ženklas.  
„Fresenius Kabi Ltd“ yra įgaliotasis naudotojas © Fresenius Kabi Ltd.

01



Užspauskite spaustuką ant tiekimo sistemos, tada prijunkite prie „EasyBag“ arba konteinerio.

02



Atidarykite pompos angą.

03



Tiekimo sistemos spaustuką sulygiuokite su rodykle „žemyn“: tinkamai uždėjus, pasigirs spragtelėjimas.

04



Tiekimo sistemos vamzdelį įstatykite tiesiai į vamzdelio kreiptuvą.

05



Uždarykite angą ir nuspauskite svertą, kad jis tvirtai užsifikuotų.

06



Įjunkite „Amika“ pompą: paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką.

07



Paspauskite automatinio užpildymo mygtuką, tada – mygtuką START.

08



Sistemai prisipildžius, dar kartą paspauskite mygtuką START.

09



Pageidaujamą srauto greitį nustatykite spausdami mygtukus „+“ arba „-“, kol įtekės pageidaujamas kiekis.

10



Nustatykite reikiamą kiekį spausdami mygtukus „+“ arba „-“, kol įtekės reikiamas kiekis.

11



Paspauskite mygtuką START, kad pradėtumėte maitinimą.

12



Norėdami sustabdyti maitinimą bet kuriuo metu, paspauskite mygtuką STOP. Baigus maitinimą arba įtekėjus reikiamam kiekiui, paspauskite mygtuką STOP.

13



Jei reikia atkurti eigos juostą po to, kai įteka reikiamas kiekis, 2–3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką STOP.

14



Norėdami išjungti pompą, paspaudę laikykite jos įjungimo/išjungimo mygtuką, kol ekrane baigsis atgalinis skaičiavimas.

