


O que fazer se...

Se o alarme soar:

 Silenciar o alarme (se necessário)


Detete a causa e execute a ação necessária

 Parar o alarme  Reiniciar a alimentação

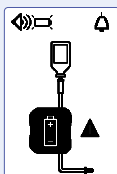


Bateria vazia

Ligue imediatamente a bomba à fonte de alimentação.

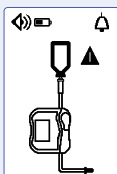


Alarme de embalagem vazia/presença de ar no conjunto

Substitua o recipiente e o conjunto ou verifique a presença de bolhas de ar.

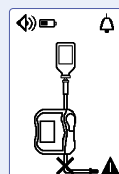


Alarme de oclusão a jusante

Verifique se o conjunto de bomba/tubo de alimentação se encontra desobstruído após a bomba, no lado do paciente.

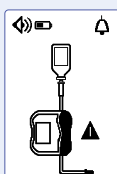


Alarme de porta aberta

Feche a porta da bomba.

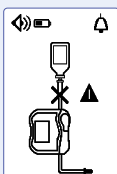


Alarme de oclusão a montante

Verifique se o conjunto de bomba se encontra desobstruído entre o recipiente e a bomba.

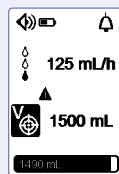


Mensagem de volume alvo quase atingido

Continue a alimentação ou termine a alimentação.

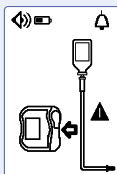


Alarme de instalação do conjunto

Verifique a posição do conjunto acima e abaixo do mecanismo da bomba e insira-o corretamente.

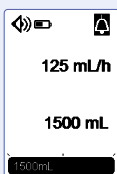


Alarme de volume alvo atingido

Termine a alimentação.

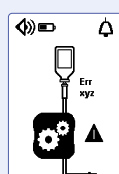

Alarme de erro da bomba

Verifique o código de erro técnico (Err xyz) e contacte o seu departamento biomédico.

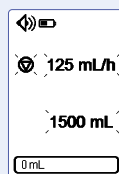

Iniciar Lembrete

Continue para o passo seguinte ou desligue a bomba.



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Amika®

BOMBA DE NUTRIÇÃO ENTÉRICA GUIA DE REFERÊNCIA GRÁFICA



PARA QUAISQUER QUESTÕES OU INFORMAÇÕES, LIGUE PARA O NÚMERO DE APOIO GRATUITO DE CUIDADOS DOMICILIÁRIOS 24 HORAS POR DIA 0808 100 1990



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Limited,
Cestrian Court, Eastgate Way,
Manor Park, Runcorn,
Cheshire WA7 1NT
Tel.: 01928 533533 Fax: 01928 533520
e-mail: scientific.affairsUK@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.com/gb
Data de preparação: Março de 2018 EN01046

Amika® é uma marca comercial registada da Fresenius Kabi AG.
A Fresenius Kabi Ltd é uma utilizadora autorizada da Fresenius Kabi Ltd.

01



Feche o grampo de constrição no conjunto de infusão e, a seguir, ligue ao EasyBag ou recipiente.

02



Abra a porta da bomba.

03



Coloque o grampo de constrição do conjunto de infusão alinhado com a seta descendente até este encaixar corretamente de forma audível.

04



Coloque o tubo do conjunto de infusão no interior da guia do tubo.

05



Feche a porta e empurre a alavanca para baixo de forma a bloqueá-la firmemente na sua posição.

06



Ligue a bomba Amika® - prima o botão ligar/desligar.

07



Prima a tecla de enchimento automático e depois prima o botão Iniciar.

08



Quando o enchimento estiver concluído, volte a premir o botão Iniciar.

09



Defina a taxa de fluxo desejada premindo as teclas +/- até atingir o volume desejado.

10



Defina o volume alvo premindo as teclas +/- até atingir o volume desejado.

11



Prima a tecla Iniciar para iniciar o processo de alimentação.

12



De forma a parar a alimentação a qualquer altura, prima a tecla Parar. Quando o processo de alimentação terminar ou o seu volume alvo for atingido, prima a tecla Parar.

13



Se necessitar de reiniciar a barra de progresso depois de o volume alvo ser atingido, prima a tecla Parar durante 2-3 segundos.

14



Para desligar a bomba, prima o botão ligar/desligar até a contagem decrescente terminar.

