


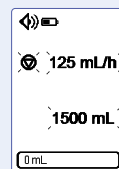
如果出现以下情形, 您需要进行相应操作:

如果发生报警:

 让报警静音(如有必要)


检测原因并进行相应的操作

 解除报警  恢复给药




启动提醒功能

进行下一步操作
或关闭营养泵。

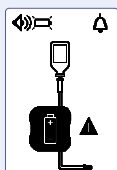


空电池

立即将泵连接至主电源。

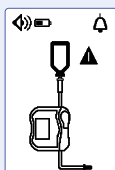


设定报警中的空袋/
空气警声

更换输液器并设置
或检查是否有气泡。

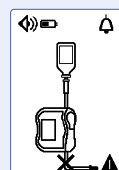


下游堵塞报警

检查患者一侧营养
泵下游的泵机组/鼻
饲管是否畅通无阻。

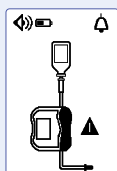


开门报警

关闭泵门

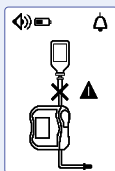


上游堵塞报警

检查泵组在输液器
和泵之间是否畅通
无阻。

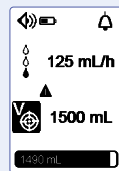


接近目标量消息

继续给药或结束给
药。

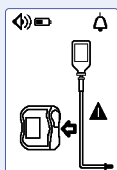


设置安装报警

检查泵机上游和下游的
安装位置, 并将其正确
插入。

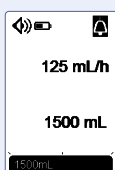

达到目标量报警

结束给药。

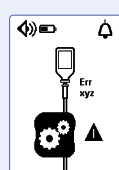

泵故障报警

注意技术错误代码
(ERR XYZ), 并联系生
物医学部门。

 **FRESENIUS
KABI**

caring for life

Amika®

肠内营养泵

图片参考指南



如果想要任何查询或资料, 请致电家庭护理
24 小时免费热线电话 0808 100 1990

 **FRESENIUS
KABI**
caring for life

Fresenius Kabi Limited,
Cestrian Court, Eastgate Way,
Manor Park, Runcorn,
Cheshire WA7 1NT
电话: 01928 533533 传真: 01928 533520
电子邮箱: scientificaffairsUK@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.com/gb
编制日期: 2018 年 3 月 EN01046

Amika® 是 Fresenius Kabi AG 的注册商标。
Fresenius Kabi Ltd 是 © Fresenius Kabi Ltd. 的授权用户

01



关闭输液袋上的螺旋夹, 然后将其连接至 EasyBag 或输液器。

02



打开泵门。

03



将输液袋螺旋夹对齐向下箭头, 直至其“咔嗒”就位。

04



将输液管笔直放入导管内。

05



关闭泵门, 向下推动手柄, 将其牢固锁定就位。

06



打开 Amika® 营养泵 - 按开/关按钮。

07



按下自动启动键, 然后按开始按钮。

08



当启动完成后, 再次按开始按钮。

09



按 +/- 键设置流量, 直至达到所需流量。

10



按 +/- 键设置目标量, 直至达到所需量。

11



按开始键开始给药。

12



若要在任何时候停止给药, 按停止键。当给药完成后, 或达到您的目标量后, 按停止键。

13



如果您需要在达到目标量后, 重置进度条, 长按停止键 2-3 秒。

14



若要关闭营养泵, 按开/关按钮直至倒数完毕。

