
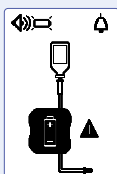


Hvad gør man, hvis ...

Hvis alarmen lyder:


 Sæt alarmen til lydløs (om nødvendigt)
Find årsagen, og gå videre til den påkrævede foranstaltning

 Slå alarmen fra  Fortsæt indgiften




Afladet batteri

Tilslut straks pumpen til et strømstik.

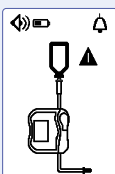


Alarm for tom pose/luft i sættet

Skift beholderen og sættet, eller se efter luftbobler.

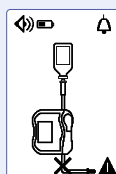


Alarm for tilstopning efter pumpen

Kontroller, at pumpesættet/sonden ikke er tilstoppet mellem pumpen og patienten.

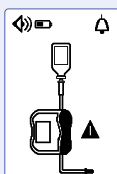


Alarm for åbent dæksel

Luk pumpedækslet.

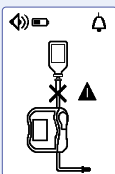


Alarm for tilstopning før pumpen

Kontroller, at pumpesættet ikke er tilstoppet mellem beholderen og pumpen.

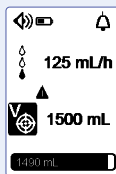


Besked, om at den ønskede mængde næsten er nået

Fortsæt indgiften, eller afslut indgiften.

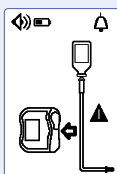


Alarm for installation af sættet

Kontroller pumpesættets position over og under pumpemekanismen, og isæt det korrekt.

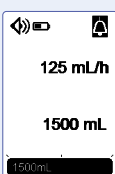


Alarm, for at den ønskede mængde er nået

Afslut indgiften.

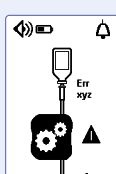

Alarm ved pumpefejl

Nedskriv den tekniske fejlkode (Err xyz), og kontakt din biomedicinske afdeling.

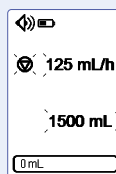

Påmindelse om start

Gå videre til næste trin, eller slå pumpen fra.



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Amika®

SONDEERNÆRINGS- PUMPE BILLEDVEJLEDNING



FOR EVENTUELLE FORESPØRGSLER ELLER INFORMATION KAN DU RINGE TIL HJEMMEASSISTANCETJENESTEN,
EN GRATIS, DØGNÅBEN HJÆLPELINJE, PÅ TELEFONNUMMER 0808 100 1990



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Limited,
Cestrian Court, Eastgate Way,
Manor Park, Runcorn,
Cheshire WA7 1NT
tlf.: +44 01928 533533 fax: +44 01928 533520
e-mail: scientific.affairsUK@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.com/gb

Dato for udarbejdelsen: Marts 2018 EN01046

Amika® er et registreret varemærke tilhørende Fresenius Kabi AG.
Fresenius Kabi Ltd er en autoriseret bruger © Fresenius Kabi Ltd.

01



Luk klemmelåsen på infusionssettet, og tilslut derefter EasyBag eller beholderen.

02



Åbn pumpedækslet.

03



Placer klemmelåsen på infusionssettet parallelt med pilen, som peger nedad, indtil den "klikker" fast.

04



Placer infusionssettets slange lige i slangerillen.

05



Luk dækslet, og tryk håndtaget ned for at låse det.

06



Tænd for Amika®-pumpen - ved at trykke på knappen "on/off".

07



Tryk på den automatiske ansugningstast, og tryk derefter på startknappen.

08



Når ansugningen er fuldført, trykkes der på startknappen igen.

09



Vælg den ønskede tilførselshastighed ved at trykke på tasterne + og -, indtil den ønskede mængde opnås.

10



Indtil den ønskede mængde ved at trykke på tasterne + og -, indtil den ønskede mængde opnås.

11



Tryk på starttasten for at begynde indgiften.

12



Indgiften kan til enhver tid stoppes ved at trykke på stoptasten. Tryk på stoptasten, når indgiften er afsluttet, eller den ønskede mængde er nået.

13



Hvis du har brug for at nulstille statuslinjen, når den ønskede mængde er opnået, skal du trykke på stoptasten i 2-3 sekunder.

14



For at slå pumpen fra skal du trykke på knappen "on/off", indtil nedtællingen er gennemført.

