


## Que faire si ...

### Si l'alarme se déclenche :

 Désactiver l'alarme sonore (si nécessaire)


Décèler la cause et poursuivre en prenant les mesures appropriées

 Arrêter l'alarme  Poursuivre l'alimentation

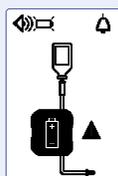


#### Batterie vide

Brancher immédiatement la pompe sur le secteur d'alimentation électrique.

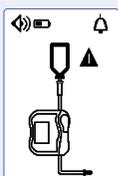


#### Alarme pour signaler une poche vide / de l'air dans la tubulure

Changer la poche et la tubulure ou vérifier toute présence de bulles d'air.

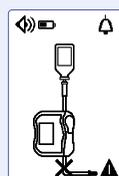


#### Alarme d'occlusion en aval

Vérifier que la tubulure de la pompe / la tubulure d'alimentation est dégagé après la pompe, du côté du patient.

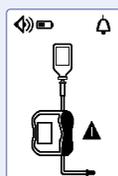

#### Alarme de porte de la pompe ouverte

Fermer la porte de la pompe.

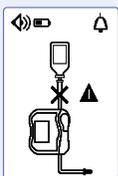


#### Alarme d'occlusion en amont

Vérifier que la tubulure de la pompe n'est pas bloquée entre la poche et la pompe.



#### Message indiquant que le volume cible est presque atteint

Continuer l'alimentation ou arrêter l'alimentation.

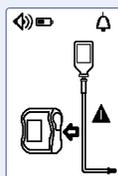


#### Alarme relative à l'installation de la tubulure

Vérifier la position de la tubulure au-dessus et en dessous du mécanisme de la pompe et l'insérer correctement.




#### Alarme indiquant que le volume cible est atteint

Arrêter l'alimentation.

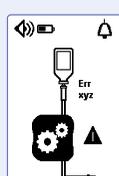

#### Alarme d'erreur de la pompe

Noter le code d'erreur technique (Err xyz) et contacter votre département biomédical.

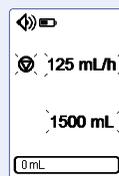

#### Rappel de démarrage

Passer à l'étape suivante ou arrêter la pompe.



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

# Amika®

## POMPE DE NUTRITION ENTÉRALE GUIDE DE RÉFÉRENCE ILLUSTRÉ



POUR TOUTE QUESTION OU INFORMATION, APPELEZ LE SERVICE D'ASSISTANCE À DOMICILE  
NUMÉRO D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE DISPONIBLE 24 H / 24 : 0808 100 1990



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Limited,  
Cestrian Court, Eastgate Way,  
Manor Park, Runcorn,  
Cheshire WA7 1NT  
tél : + 44 (0)1928 533533 fax : +44 (0)1928 533520  
courriel : scientific.affairsUK@fresenius-kabi.com  
www.fresenius-kabi.com/gb  
Date de préparation Mars 2018 EN01046

Amika® est une marque déposée de Fresenius Kabi AG.  
Fresenius Kabi Ltd est un utilisateur autorisé de © Fresenius Kabi Ltd.

01



Fermer la pince de retenue sur la tubulure et brancher la poche Easybag ou le récipient.

02



Ouvrir la porte de la pompe.

03



Positionner la pince de retenue de la tubulure de sorte qu'elle soit alignée avec la flèche vers le bas jusqu'à ce qu'elle se « clique » en place.

04



Placer le tube de la tubulure bien droit à l'intérieur du rail du tube.

05



Fermer la porte, enfoncer le levier pour le verrouiller fermement en place.

06



Allumer la pompe Amika® - en appuyant sur le bouton « on/off » (marche/arrêt).

07



Appuyer sur la touche d'amorçage automatique, puis appuyer sur le bouton « start » (démarrer).

08



Lorsque l'amorçage est terminé, appuyer de nouveau sur le bouton « start » (démarrer).

09



Régler le débit souhaité en appuyant sur les touches +/- jusqu'à atteindre le débit souhaité.

10



Régler le volume cible en appuyant sur les touches +/- jusqu'à atteindre le débit souhaité.

11



Appuyer sur la touche « start » (démarrer) pour démarrer l'alimentation.

12



Pour arrêter l'alimentation à tout moment, appuyer sur la touche « stop » (arrêter) Lorsque l'alimentation est terminée ou lorsque votre volume cible est atteint, appuyer sur la touche « stop » (arrêter).

13



S'il est nécessaire de réinitialiser la barre de progression une fois que le volume cible est atteint, appuyer sur la touche « stop » (arrêter) pendant 2-3 secondes.

14



Pour éteindre la pompe, appuyer sur le bouton « on/off » (marche/arrêt) jusqu'à ce que le compte à rebours se termine.

