


# Was tun, wenn...

## Bei Auftreten eines Alarms:


Alarmton (gegebenenfalls) ausschalten

Ursache feststellen und erforderliche Maßnahme treffen


Alarm quittieren Nahrungsgabe fortsetzen

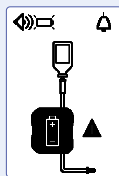


**Akku leer**  
Pumpe umgehend mit dem Stromnetz verbinden.

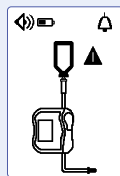


**Alarm: Beutel leer/Lufteintritt**  
Behälter und Set austauschen oder auf Luftbläschen prüfen.

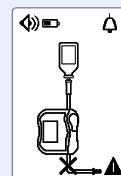


**Alarm: hinterer Durchfluss blockiert**  
Pumpenset/Ernährungs-sonde patientenseitig (hinter der Pumpe) prüfen.

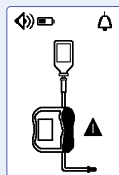


**Alarm: Klappe offen**  
Klappe an der Pumpe schließen.

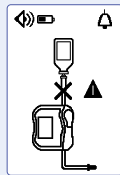


**Alarm: vorderer Durchfluss blockiert**  
Pumpenset zwischen Behälter und Pumpe prüfen.

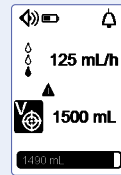


**Hinweis: Zielvolumen fast erreicht**  
Nahrungsgabe fortsetzen oder beenden.

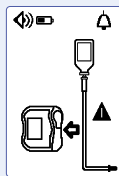


**Alarm: Befestigung des Pumpensets**  
Position des Sets ober- und unterhalb des Fördermechanismus prüfen und korrekt einsetzen.

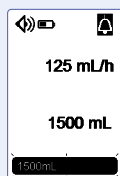

**Alarm: Zielvolumen erreicht**  
Nahrungsgabe beenden.

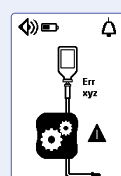

**Alarm: Pumpenfehler**  
Fehlercode (Err xyz) notieren und an die zuständige Abteilung für Biomedizin weiterleiten.

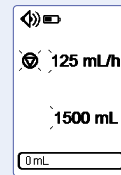

Erinnerungsfunktion starten

Mit dem nächsten Schritt fortfahren oder Pumpe ausschalten.



**FRESENIUS KABI**

caring for life

# Amika®

## ENTERALE ERNÄHRUNGSPUMPE ILLUSTRIERTE KURZANLEITUNG



WENN SIE FRAGEN HABEN ODER NÄHERE AUSKÜNFTE WÜNSCHEN, RUFEN SIE DIE RUND UM DIE UHR BESETZTE KOSTENLOSE HOTLINE "HÄUSLICHE KRANKENPFLEGE" UNTER 0808 100 1990 AN.

**FRESENIUS KABI**  
caring for life

Fresenius Kabi Limited,  
Cestrian Court, Eastgate Way,  
Manor Park, Runcorn,  
Cheshire WA7 1NT  
Tel.: 01928 533533 Fax: +44 1928 533520  
E-Mail: scientific.affairsUK@fresenius-kabi.com  
www.fresenius-kabi.com/gb  
Erstellt: März 2018 EN01046

Amika® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fresenius Kabi AG.  
Fresenius Kabi Ltd ist ein autorisierter Nutzer © Fresenius Kabi Ltd.

01



Die Schlauchklemme am Überleitgerät schließen und dann mit dem Tropfkammer-Ansatz EasyBag oder dem Nahrungsbehälter verbinden.

02



Die Klappe an der Pumpe öffnen.

03



Die Schlauchklemme am Überleitgerät nach unten in der angegebenen Pfeilrichtung einsetzen, bis sie mit einem „Klicken“ einrastet.

04



Den Schlauch des Überleitgerätes gerade in die Schlauchführung einlegen.

05



Die Klappe schließen, zum Verriegeln den Hebel nach unten drücken, bis er einrastet.

06



Die Amika® Ernährungspumpe durch Drücken auf die EIN/AUS-Taste einschalten.

07



Die automatische Vorfülltaste drücken, und dann die Starttaste drücken.

08



Nachdem das Vorfüllen abgeschlossen ist, die Starttaste erneut drücken.

09



Die Durchflussmenge durch Drücken der +/-Tasten einstellen. Die Tasten so lange drücken, bis das gewünschte Volumen erreicht ist.

10



Das Zielvolumen durch Drücken der +/-Tasten einstellen. Die Tasten so lange drücken, bis das gewünschte Volumen erreicht ist.

11



Die Starttaste drücken, um mit der Nahrungsgabe zu beginnen.

12



Zum Stoppen der Nahrungsgabe die Stopp-Taste drücken. Wenn die Nahrungsgabe beendet oder das eingestellte Zielvolumen erreicht ist, die Stopp-Taste drücken.

13



Um die Fortschrittsanzeige nach Erreichen des Zielvolumens zurückzusetzen, die Stopp-Taste 2-3 Sekunden lang gedrückt halten.

14



Zum Ausschalten der Pumpe die EIN/AUS-Taste drücken, bis der Countdown abgeschlossen ist.

