



Τι να κάνετε αν...


Αν χτυπήσει συναγερμός:

 Σιγήστε τον συναγερμό (αν χρειάζεται)

Εντοπίστε την αιτία και προβείτε στην κατάλληλη ενέργεια


 Διακόψτε τον συναγερμό

 Επανεκκινήστε τη σίτιση

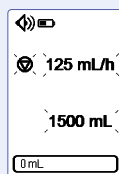


Έναρξη ειδοποίησης

Προχωρήστε στο επόμενο βήμα ή απενεργοποιήστε την αντλία.

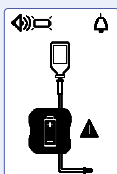


Άδεια μπαταρία

Συνδέστε αμέσως την αντλία στην παροχή ρεύματος.

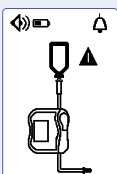


Συναγερμός άδειας σακούλας/αέρα στο σετ

Αλλάξτε δοχείο και σετ ή ελέγξτε για φυσαλίδες αέρα.

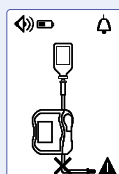


Συναγερμός απόφραξης κατάντη

Ελέγξτε αν το σετ αντλίας/ο σωλήνας σίτισης είναι καθαρό μετά την αντλία, στην πλευρά του ασθενούς.

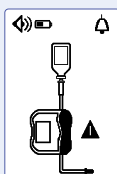


Συναγερμός ανοιχτής θύρας

Κλείστε τη θύρα της αντλίας.

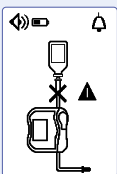


Συναγερμός απόφραξης ανάντη

Ελέγξτε αν το σετ αντλίας είναι καθαρό μεταξύ του δοχείου και της αντλίας.

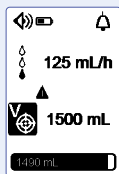


Μήνυμα ότι σχεδόν συμπληρώθηκε ο όγκος-στόχος

Συνεχίστε ή διακόψτε τη σίτιση.

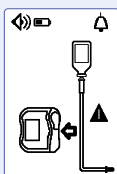


Συναγερμός τοποθέτησης σετ

Ελέγξτε τη θέση του σετ επάνω και κάτω από τον μηχανισμό της αντλίας και τοποθετήστε το σωστά.

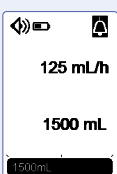

Συναγερμός συμπλήρωσης του όγκου-στόχου

Σταματήστε τη σίτιση.

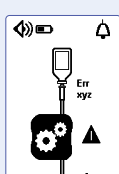

Συναγερμός σφάλματος αντλίας

Σημειώστε τον κωδικό του τεχνικού σφάλματος (Err xyz) και επικοινωνήστε με το βιοϊατρικό σας τμήμα.

**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Amika®

ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ



ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΉΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ
ΣΤΟ 0808 100 1990, 24 ΏΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ


**FRESENIUS
KABI**
caring for life

Fresenius Kabi Limited,
Cestrian Court, Eastgate Way,
Manor Park, Runcorn,
Cheshire WA7 1NT
τηλ.: 01928 533533 fax: 01928 533520
email: scientific.affairsUK@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.com/gb

Ημερομηνία προετοιμασίας: Μάρτιος 2018 EN01046

Amika® είναι εμπορικό σήμα της Fresenius Kabi AG.
Η Fresenius Kabi Ltd είναι εξουσιοδοτημένος χρήστης © Fresenius
Kabi Ltd.

01

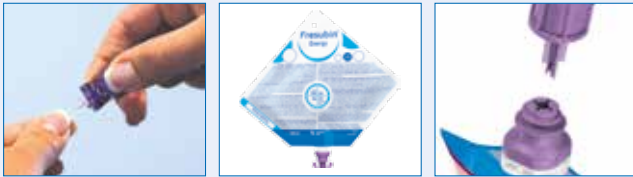

Κλείστε τον σφιγκτήρα στο σετ παροχής και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε σύνδεση με την EasyBag ή το δοχείο.

02



Ανοίξτε τη θύρα της αντλίας.

03



Τοποθετήστε τον σφιγκτήρα του σετ παροχής σύμφωνα με το βέλος προς τα κάτω, μέχρι να κουμπώσει με κλικ στη θέση του.

04



Τοποθετήστε ευθεία τον σωλήνα του σετ παροχής μέσα στον οδηγό σωλήνα.

05



Κλείστε τη θύρα και ωθήστε τον μοχλό προς τα κάτω, για να τον ασφαλίσετε καλά στη θέση του.

06



Ενεργοποιήστε την αντλία Amika® – πατώντας το πλήκτρο on/off.

07



Πατήστε το πλήκτρο αυτόματης πλήρωσης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης.

08



Όταν η πλήρωση ολοκληρωθεί, πατήστε ξανά το πλήκτρο εκκίνησης.

09



Ρυθμίστε τον επιθυμητό ρυθμό ροής πατώντας τα πλήκτρα +/- έως ότου επιτευχθεί ο επιθυμητός όγκος.

10



Καθορίστε τον όγκο-στόχο πατώντας τα κουμπιά +/- έως ότου επιτευχθεί ο επιθυμητός όγκος.

11



Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης, για να αρχίσει η σίτιση.

12



Για να σταματήσετε τη σίτιση οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε το πλήκτρο διακοπής. Όταν ολοκληρωθεί η σίτιση ή συμπληρωθεί ο όγκος-στόχος, πατήστε το πλήκτρο διακοπής.

13



Εάν χρειαστεί να επαναρυθμίσετε τη γραμμή προόδου, αφού συμπληρωθεί ο όγκος-στόχος, πατήστε το πλήκτρο διακοπής για 2-3 δευτερόλεπτα.

14



Για να απενεργοποιήσετε την αντλία, πατήστε το πλήκτρο on/off, μέχρι να ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση.

