


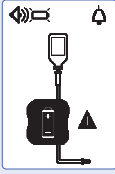
क्या करें यदि...

यदि अलार्म बजता है:

 अलार्म को मौन कर दें (यदि आवश्यक हो)

कारण का पता लगाएँ और उचित कार्यवाही की ओर बढ़ें

 अलार्म को रिलीज़ करें  फ्रीडिंग को फिर आरंभ करें




बैटरी समाप्त

पम्प को तुरंत मेन सप्लायर्ड से कनेक्ट करें।



सेट अलार्म में बैग/हवा को खाली करें

कंटेनर बदलें और सेट करें या हवा के बुलबुलों के लिए जांच करें।

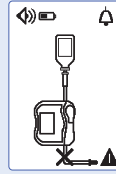


डाउनस्ट्रीम बाधा अलार्म

जांच करें कि मरीज़ की ओर, पम्प सेट/फ्रीडिंग ट्यूब पम्प के बाद साफ है।



दरवाज़ा खुलने का अलार्म

पम्प के दरवाज़े को बंद करें।

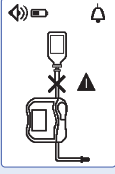


अपस्ट्रीम बाधा अलार्म

जांच करें कि पम्प सेट कंटेनर और पम्प के बीच साफ है।




लक्ष्य मात्रा तक करीब-करीब पहुंच गये हैं का संदेश

फ्रीडिंग जारी रखें या फ्रीडिंग समाप्त करें।

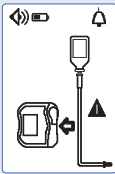


स्थापना अलार्म सेट करें

पम्प क्रियावली के ऊपर और नीचे सेट स्थिति की जांच करें और उसे ठीक से डालें।

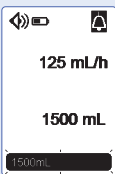

लक्ष्य मात्रा तक पहुँचने संबंधी अलार्म

फ्रीडिंग समाप्त करें।

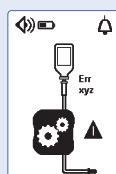

पम्प में त्रुटि का अलार्म

तकनीकी त्रुटि कोड (Err xyz) को नोट करें और अपने बायोमैडिकल विभाग से सम्पर्क करें।



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Amika®

आंत्र पोषण पम्प

संचित संदर्भ गाइड



किसी जानकारी या सूचना के लिए होमकेयर
24 घंटे निःशुल्क सहायता नम्बर 0808 100 1990 को कॉल करें



**FRESENIUS
KABI**
caring for life

Fresenius Kabi Limited,
Cestrian Court, Eastgate Way,
Manor Park, Runcorn,
Cheshire WA7 1NT
द्वारा: 01928 533533 फ़ैक्स: 01928 533520
ईमेल: scientificaffairsUK@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.com/gb
केबल नंबर: मार्च 2018 EN01046

Amika® Fresenius Kabi AG, बा. फ्रीडलैंड स्ट्रेसबर्ग
Fresenius Kabi Ltd एक अफिलिएट कंपनी है © Fresenius Kabi Ltd.

01




देने वाले सेट पर पिंच क्लैप को बंद कर दें और फिर ईजीबैग (Easybag) या कंटेनर से कनेक्ट कर दें।

02



पम्प के दरवाजे को खोलें।

03

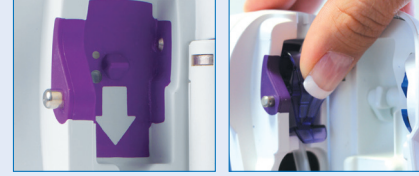

देने वाले सेट पर पिंच क्लैप को नीचे की ओर वाले तीर के साथ लाइन में लाएँ जब तक कि वह स्थान पर "क्लिक" न करे।

04



देने वाले सेट की ट्यूब को ट्यूब गाइड के अन्दर सीधा डाल दें।

05



दरवाजा बंद करें, लीवर को अच्छे से बंद करने के लिए नीचे की ओर दबाएँ।

06



Amika® पम्प को - ऑन/ऑफ बटन दबा कर चालू करें।

07



ऑटोमेटिक प्राइमिंग की को दबाएँ, और फिर शुरु बटन को दबाएँ।

08



जब प्राइमिंग पूरा हो जाए तो शुरु बटन को फिर से दबाएँ।

09



+/- कीज़ को तब तक दबाकर वांछित प्रवाह दर को सेट करें जब तक कि वांछित मात्रा तक न पहुँच जाएं।

10



+/- कीज़ को तब तक दबाकर लक्ष्य मात्रा को सेट करें जब तक कि वांछित मात्रा तक न पहुँच जाएँ।

11



फ्रीडिंग को शुरू करने के लिए शुरु की को दबाएँ।

12



किसी भी समय फ्रीडिंग को रोकने के लिए, बंद की को दबाएँ। फ्रीडिंग समाप्त होने या आपकी लक्ष्य मात्रा प्राप्त होने के बाद, बंद की को दबाएँ।

13



यदि आपको लक्ष्य मात्रा तक पहुँच जाने के बाद प्रगति बार को रीसेट करने की जरूरत हो, तो बंद की को 2-3 सेकंड तक दबा कर रखें।

14



पम्प को बंद करने के लिए ऑन/ऑफ बटन को तब तक दबाएँ जब तक कि काउंटडाउन पूरा न हो जाए।

