


## Cosa fare se...

### Se viene emesso un allarme acustico:

 Silenziare l'allarme (se necessario)


Individuare la causa e procedere con l'azione adeguata.

 Disattivare l'allarme  Riprendere l'alimentazione

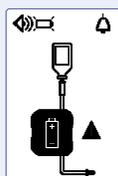


#### Batteria scarica

Collegare immediatamente la pompa all'alimentazione di rete.

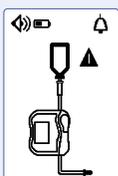


#### Allarme sacca vuota/aria all'interno del set

Sostituire contenitore e set o verificare la presenza di bolle d'aria.

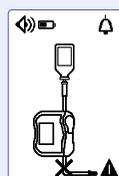

#### Allarme occlusione a valle

Verificare che il set pompa / il tubo per alimentazione non siano ostruiti tra la pompa e il paziente.

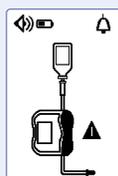

#### Allarme sportello aperto

Chiudere lo sportello della pompa.




#### Allarme occlusione a monte

Verificare che il set pompa non sia ostruito tra il contenitore e la pompa.



#### Messaggio volume programmato quasi raggiunto

Continuare o terminare l'alimentazione.

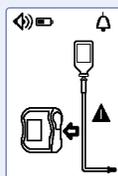


#### Allarme installazione set

Controllare la posizione del set sopra e sotto il meccanismo della pompa e inserirlo correttamente.




#### Allarme volume programmato raggiunto

Terminare l'alimentazione.

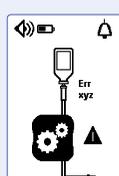

#### Allarme errore pompa

Annotare il codice dell'errore tecnico (Err xyz) e contattare il reparto biomedico.

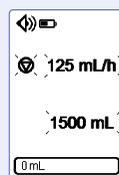

#### Avviare promemoria

Passare alla fase successiva o spegnere la pompa.



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

# Amika®

POMPA PER NUTRIZIONE ENTERALE  
GUIDA DI RIFERIMENTO ILLUSTRATA



PER QUALSIASI DOMANDA O RICHIESTA DI INFORMAZIONI, CONTATTARE  
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA 24 ORE SU 24 AL NUMERO VERDE 0808 100 1990



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Limited,  
Cestrian Court, Eastgate Way,  
Manor Park, Runcorn,  
Cheshire WA7 1NT  
Regno Unito  
tel: +44-1928-533533 fax: +44-1928-533520  
email: scientific.affairsUK@fresenius-kabi.com  
www.fresenius-kabi.com/gb

Data di preparazione: Marzo 2018 EN01046

Amika® è un marchio registrato di Fresenius Kabi AG.  
Fresenius Kabi Ltd dispone dell'autorizzazione all'utilizzo ©  
Fresenius Kabi Ltd.

01



Chiudere il morsetto sul deflussore e quindi collegarlo alla sacca EasyBag o al contenitore.

02



Aprire lo sportello della pompa.

03



Posizionare il morsetto a strozzatura del deflussore allineandolo con la freccia rivolta verso il basso finché non resta bloccato con un "clac".

04



Posizionare il tubo del deflussore diritto all'interno dell'apposita guida.

05



Chiudere lo sportello e spingere la leva verso il basso per bloccarlo saldamente.

06



Accendere la pompa Amika® - premendo il tasto on/off.

07



Premere il tasto di preparazione automatica e quindi premere il tasto avvio.

08



Quando la preparazione è stata ultimata, premere nuovamente il tasto avvio.

09



Impostare la velocità di flusso desiderata premendo i tasti +/- fino al raggiungimento del volume desiderato.

10



Impostare il volume programmato premendo i tasti +/- fino al raggiungimento del volume desiderato.

11



Premere il tasto avvio per avviare l'alimentazione.

12



Per arrestare l'alimentazione in qualunque momento, premere il tasto stop. Quando l'alimentazione è ultimata oppure è stato raggiunto il volume programmato, premere il tasto stop.

13



Se occorre reimpostare la barra di avanzamento dopo il raggiungimento del volume programmato, tenere premuto il tasto stop per 2-3 secondi.

14



Per spegnere la pompa, tenere premuto il tasto on/off fino alla fine del conto alla rovescia.

