


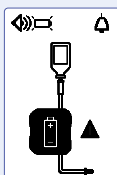
## Kā rīkoties, ja...

### Ja rodas trauksmes ziņojums:

 Izslēgt trauksmes ziņojuma skaņu (ja nepieciešams)


Nosakiet iemeslu un attiecīgi rīkojieties

 Apstiprināt trauksmes ziņojumu  Atsākt barošanu




#### Tukšs akumulators

Nekavējoties pieslēdziet sūkni elektrotīklam.

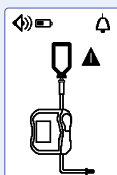


#### Trauksme par tukšu maisiņu/gaisa ieplūdi sistēmā

Nomainiet konteineru un sistēmu vai pārbaudiet, vai nav gaisa burbuļu.

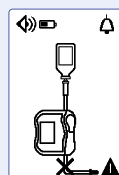


#### Noslēgtas lejupplūsmas trauksme

Pārbaudiet, vai sūkņa sistēma/barošanas caurule ir tīra virzienā zem sūkņa pacienta pusē.

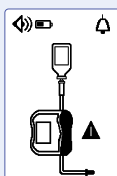


#### Atvērta durvju trauksme

Aizveriet sūkņa durvis.

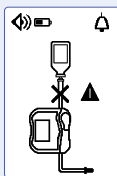


#### Noslēgtas augšupplūsmas trauksme

Pārbaudiet, vai sūkņa sistēma starp konteineru un sūkni ir tīra.

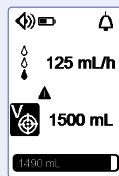


#### Gandrīz sasniegta mērķa tilpuma ziņojums

Turpiniet vai pabeidziet barošanu.

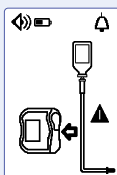


#### Sistēmas uzstādīšanas trauksme

Pārbaudiet sistēmas pozīciju virs un zem sūkņa mehānisma un iestatiet to pareizi.

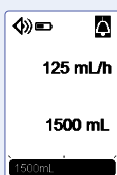

#### Sasniegta mērķa tilpuma trauksme

Pabeidziet barošanu.

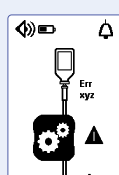

#### Sūkņa kļūdas trauksme

Pierakstiet tehniskās kļūdas kodu (Err xyz) un sazinieties ar biomedicīnas nodaļu.



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

# Amika®

## ENTERĀLĀS BAROŠANAS SŪKNIS ILUSTRATĪVA INSTRUKCIJA



JA JUMS RODAS JEBKĀDI JAUTĀJUMI VAI NEPIECIEŠAMA INFORMĀCIJA, ZVANIET  
MĀJAS APRŪPES PALĪDZĪBAS DIENESTAM PA BEZMAKSAS TĀLRUNI 0808 100 1990



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Limited,  
Cestrian Court, Eastgate Way,  
Manor Park, Runcorn,  
Cheshire WA7 1NT  
Tālrunis: 01928 533533, fakss: 01928 533520,  
e-pasts: scientificaffairsUK@fresenius-kabi.com  
www.fresenius-kabi.com/gb  
Sagatavošanas datums: 2018. gada marts, EN10146

Amika® ir uzņēmuma Fresenius Kabi AG reģistrēta preču zīme.  
Fresenius Kabi Ltd. ir pilnvarots lietotājs © Fresenius Kabi Ltd.

01



Aizveriet infūzijas sistēmas spaili un pēc tam pievienojiet sistēmu EasyBag maisīnam vai konteineram.

02



Atveriet sūkņa durvis.

03



Novietojiet infūzijas sistēmas spaili atbilstoši leņķupvērstajai bultiņai, līdz tā tiek fiksēta un atskan klikšķis.

04



Novietojiet padeves sistēmas cauruli taisni caurules vadotnē.

05



Aizveriet durvis un spiediet sviru uz leju, lai tā tiktu stingri fiksēta.

06



Izslēdziet Amika<sup>®</sup> sūkni, nospiežot pogu On/Off (Iesl./Izsl.).

07



Nospiediet automātiskās uzpildes taustiņu un pēc tam pogu Start (Sākt).

08



Kad uzpilde ir pabeigta, vēlreiz nospiediet pogu Start (Sākt).

09



Iestatiet vajadzīgo plūsmas ātrumu, spiežot +/- taustiņus, līdz ir sasniegts vajadzīgais tilpums.

10



Iestatiet mērķa tilpumu, spiežot +/- taustiņus, līdz ir sasniegts vajadzīgais tilpums.

11



Nospiediet taustiņu Start (Sākt), lai sāktu barošanu.

12



Lai jebkurā brīdī apturētu barošanu, nospiediet taustiņu Stop (Apturēt). Kad barošana ir pabeigta vai ir sasniegts mērķa tilpums, nospiediet taustiņu Stop (Apturēt).

13



Ja pēc mērķa tilpuma sasniegšanas jāveic norises joslas atiestāde, nospiediet un 2–3 sekundes turiet taustiņu Stop (Apturēt).

14



Lai izslēgtu sūkni, nospiediet pogu On/Off (Iesl./Izsl.), līdz tiek pabeigta laika atskaite.

