

Co zrobić, jeśli...


W przypadku włączenia alarmu:

 Wyciszyć alarm (jeśli jest to konieczne)

Ustalić przyczynę i wykonać odpowiednie czynności


 Wyłączyć alarm

 Wznówić podawanie pokarmu

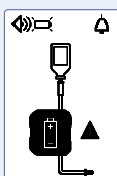


Rozładowany akumulator

Natychmiast podłączyć pompę do zasilania sieciowego.

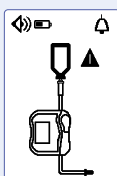


Alarm opróżnienia worka/zapowietrzenia zestawu

Wymienić pojemnik i zestaw lub sprawdzić pod kątem pęcherzyków powietrza.

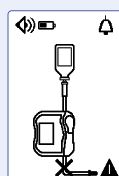


Alarm niedrożności za pompą

Sprawdzić, czy zestaw pompy /zgiębnik są drożne za pompą po stronie pacjenta.

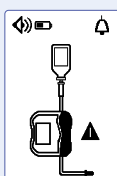

Alarm otwarcia pokrywy

Zamknąć pokrywę pompy.

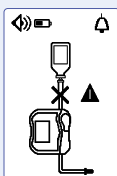


Alarm niedrożności przed pompą

Sprawdzić, czy zestaw pompy jest drożny między pojemnikiem a pompą.




Komunikat o zbliżeniu się do objętości docelowej

Kontynuować podawanie pokarmu lub je zakończyć.

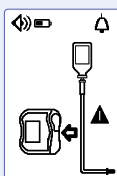


Alarm nieprawidłowej instalacji zestawu

Sprawdzić pozycję zestawu nad i pod mechanizmem pompy oraz zainstalować go prawidłowo.

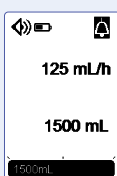


Alarm osiągnięcia objętości docelowej

Zakończyć podawanie pokarmu.

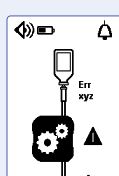

Alarm błędu pompy

Zanotować kod błędu (Err xyz) i skontaktować się z odpowiednim oddziałem biomedycznym.

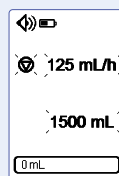

Przypomnienie o uruchomieniu

Przejdź do kolejnego etapu lub wyłącz pompę.



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Amika®

POMPA DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO INSTRUKCJE OBRAZKOWE



W RAZIE JAKIKOLWIEK PYTAŃ ALBO ABY UZYSKAĆ INFORMACJE, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z BEZPŁATNĄ, 24-GODZINNĄ LINIĄ POMOCY POD NUMEREM 0808 100 1990



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Limited,
Cestrian Court, Eastgate Way,
Manor Park, Runcorn,
Cheshire WA7 1NT
tel.: 01928 533533 faks: 01928 533520
e-mail: scientific.affairsUK@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.com/gb

Data opracowania: marzec 2018 EN01046

Amika® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Fresenius Kabi AG.
Fresenius Kabi Ltd jest autoryzowanym użytkownikiem © Fresenius Kabi Ltd.

01



Zamknąć zacisk na zestawie podającym, a następnie podłączyć do worka EasyBag lub pojemnika.

02



Otworzyć pokrywę pompy.

03



Przesunąć zacisk zestawu podającego w dół zgodnie ze strzałką – kliknięcie sygnalizuje właściwą pozycję zacisku.

04



Umieścić zgłębnik zestawu podającego w uchwycie zgłębnika.

05



Zamknąć pokrywę i odpowiednio ją zablokować, przesuwając dźwignię w dół.

06



Włączyć pompę Amika® – nacisnąć przycisk wł./wył.

07



Nacisnąć przycisk automatycznego przygotowywania, a następnie nacisnąć przycisk uruchomienia.

08



Po zakończeniu przygotowywania ponownie nacisnąć przycisk uruchomienia.

09



Ustawić wymagane natężenie przepływu, naciskając przyciski +/- aż do osiągnięcia odpowiedniej wartości.

10



Ustawić docelową objętość pokarmu, naciskając przyciski +/- aż do osiągnięcia odpowiedniej wartości.

11



Nacisnąć przycisk uruchomienia, aby rozpocząć podawanie pokarmu.

12



Aby zakończyć podawanie pokarmu w dowolnym momencie, nacisnąć przycisk zatrzymania. Po zakończeniu podawania pokarmu lub osiągnięciu objętości docelowej nacisnąć przycisk zatrzymania.

13



W przypadku konieczności zresetowania paska postępu po osiągnięciu docelowej objętości pokarmu, nacisnąć przycisk zatrzymania i przytrzymać go przez 2-3 sekundy.

14



Aby wyłączyć pompę, nacisnąć przycisk wł./wył. i przytrzymać, aż urządzenie zakończy odliczanie.

