


Ce să faceți dacă...

Dacă se declanșează alarma:

 Setati alarma în modul silențios (dacă este necesar)


Identificați cauza și luați măsurile necesare

 Oprirea alarmei  Reluarea alimentării

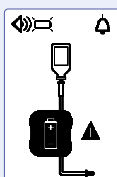


Baterie consumată

Conectați imediat pompa la rețeaua de alimentare cu curent.

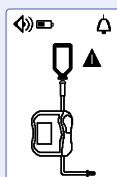


Alarmă sac gol/prezență aer în set

Schimbați recipientul și setul sau verificați dacă există bule de aer.

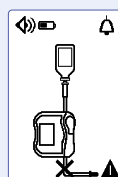


Alarmă ocluzie linie de alimentare

Asigurați-vă că setul pompei / tubul de alimentare nu este înfundat în secțiunea dinspre pacient.

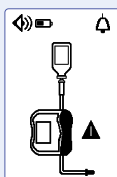


Alarmă ușa deschisă

Închideți ușa pompei.

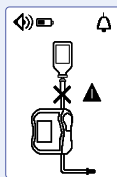


Alarmă ocluzie linie de retur

Asigurați-vă că setul pompei nu este înfundat între recipient și pompă.

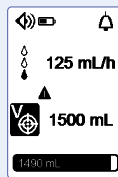


Mesaj de avertizare volum vizat aproape atins

Continuați alimentarea sau întrerupeți alimentarea.

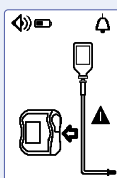


Alarmă poziție set

Verificați poziția setului deasupra și sub mecanismul pompei și poziționați setul corect.

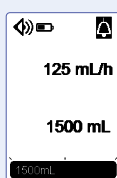

Alarmă volum vizat atins

Întrerupeți alimentarea.

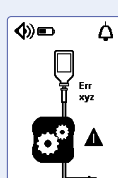

Alarmă eroare pompă

Notați codul erorii tehnice (Err xyz) și contactați departamentul biomedical.



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Amika®

POMPĂ DE NUTRIȚIE ENTERALĂ
GHID DE REFERINȚĂ ILUSTRAT



PENTRU ÎNTREBĂRI SAU INFORMAȚII, APELAȚI NUMĂRUL TELEFONIC GRATUIT DE ASISTENȚĂ LA DOMICILIU, DISPONIBIL NON STOP, 0808 100 1990



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Limited,
Cestrian Court, Eastgate Way,
Manor Park, Runcorn,
Cheshire WA7 1NT
tel: 01928 533533 fax: 01928 533520
e-mail: scientific.affairsUK@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.com/gb
Data redactării: Martie 2018 EN01046

Amika® este o marcă comercială înregistrată a Fresenius Kabi AG.
Fresenius Kabi Ltd este un utilizator autorizat © Fresenius Kabi Ltd.

01



Fixați în poziție clema de prindere pe setul de administrare, apoi conectați setul la EasyBag sau la recipient.

02



Deschideți ușa pompei.

03



Poziționați clema de prindere a setului de administrare aliniată cu săgeata în jos până când se fixează în poziție.

04



Poziționați tubul setului de administrare în interiorul ghidajului pentru tub.

05



Închideți ușa, apăsați pârghia în jos pentru a o fixa ferm în poziție.

06



Porniți pompa Amika apăsând butonul de pornire/oprire.

07



Apăsați tasta de amorsare automată, apoi apăsați butonul start.

08



După finalizarea amorsării, apăsați din nou butonul start.

09



Setați viteza fluxului apăsând tastele +/- până când ajungeți la volumul dorit.

10



Setați volumul vizat apăsând tastele +/- până când ajungeți la volumul dorit.

11



Apăsați tasta start pentru a începe alimentarea.

12



Pentru a întrerupe alimentarea, apăsați tasta stop. După finalizarea alimentării sau când s-a atins volumul vizat, apăsați tasta stop.

13



Dacă trebuie să resetați bara de progres după ce s-a atins volumul vizat, apăsați tasta stop timp de 2-3 secunde.

14



Pentru a opri pompa, apăsați butonul pornire/oprire până la finalizarea numărării inverse.

