


Что делать, если...

В случае подачи аварийного сигнала:

Отключите звук аварийного сигнала (при необходимости)


Установите причину и выполните соответствующие действия

Сбросьте аварийный сигнал Возобновите подачу питания

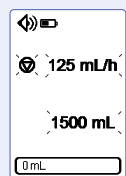


Напоминание о включении

Перейдите к следующему действию или выключите насос.

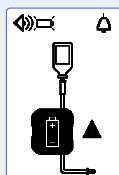


Разряженная аккумуляторная батарея

Немедленно подключите насос к электросети.

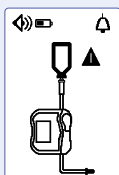


Аварийный сигнал опорожнения мешка/наличия воздуха в системе

Замените контейнер и систему или выполните проверку на наличие пузырьков воздуха.

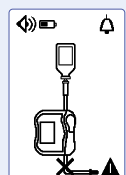


Аварийный сигнал закуртки после устройства

Проверьте насосную систему/питательную трубку на наличие инородных включений после насоса на стороне пациента.

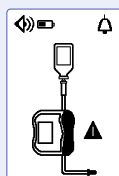


Аварийный сигнал открытия крышки

Закройте крышку насоса.

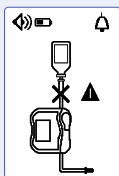


Аварийный сигнал закуртки до устройства

Проверьте насосную систему между контейнером и насосом на наличие инородных включений.

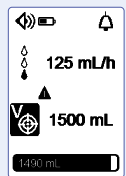


Сообщение о почти полном достижении целевого объема

Продолжите или завершите подачу питания.

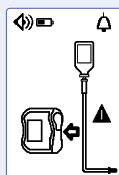


Аварийный сигнал – установка системы

Проверьте положение системы сверху и внизу насосного механизма и установите ее правильным образом.

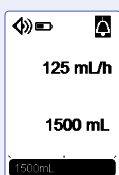

Аварийный сигнал достижения целевого объема

Завершите подачу питания.

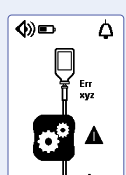

Сигнал ошибки насоса

Запишите код технической ошибки (Err xyz) и свяжитесь со своим отделом биомедицины.

FRESENIUS KABI

caring for life

Amika®

НАСОС ДЛЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО ВОПРОСЫ ИЛИ ВАМ НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ЗВОНИТЕ В КРУГЛОСУТОЧНУЮ БЕСПЛАТНУЮ СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ ПО НОМЕРУ 0808 100 1990

FRESENIUS KABI
caring for life

Fresenius Kabi Limited,
Cestrian Court, Eastgate Way,
Manor Park, Runcorn,
Cheshire WA7 1NT (Великобритания)
Тел.: 01928 533533, факс: 01928 533520
Эл. почта: scientific.affairsUK@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.com/gb

Дата составления: март 2018 года, EN01046

Amika® – зарегистрированный товарный знак компании Fresenius Kabi AG.
Fresenius Kabi Ltd является уполномоченным пользователем знака © Fresenius Kabi Ltd.

01



Закройте зажим на инфузионной системе, затем подсоедините ее к EasyBag или контейнеру.

02



Откройте крышку насоса.

03



Установите зажим инфузионной системы в соответствии со стрелкой, указывающей вниз, так, чтобы раздался щелчок.

04



Установите трубку инфузионной системы непосредственно внутри направляющей для трубки.

05



Закройте крышку, нажмите на рычаг в направлении вниз для ее плотного закрытия.

06



Запустите насос Amika®, нажав кнопку включения («on/off»).

07



Нажмите кнопку автоматического заполнения, затем нажмите кнопку пуска.

08



После завершения заполнения снова нажмите кнопку пуска.

09



Задайте необходимую скорость подачи питания, нажимая кнопки «+»/«-», пока не будет достигнут нужный объем.

10



Задайте целевой объем, нажимая кнопки «+»/«-», пока не будет достигнуто необходимое значение.

11



Нажмите кнопку пуска для начала подачи питания.

12



Чтобы в любой момент отключить подачу питания, нажмите кнопку остановки. По окончании подачи питания или при достижении целевого объема нажмите кнопку остановки.

13



Если необходимо сбросить индикатор выполнения после достижения целевого объема, нажмите кнопку остановки и удерживайте ее нажатой в течение 2–3 секунд.

14



Для выключения насоса нажмите кнопку включения («on/off») и удерживайте ее нажатой до завершения обратного отсчета.

