


## Qué hacer en caso de...

### Si se activa la alarma:

 Silencie la alarma (si fuera necesario)


Detecte la causa y realice la acción adecuada

 Desactive la alarma  Reanude la alimentación

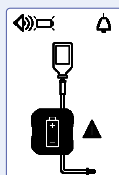


#### Batería vacía

Conecte inmediatamente la bomba al suministro eléctrico.

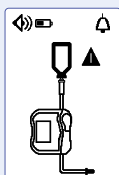


#### Alarma de bolsa vacía/aire en el conjunto

Cambie el contenedor y el conjunto o compruebe si hay burbujas de aire.

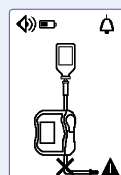


#### Alarma de oclusión de flujo descendente

Compruebe que el conjunto de bomba/tubo de alimentación no esté obstruido después del bombeo, en el lado del paciente.

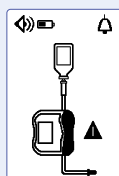

#### Alarma de apertura de puerta de bomba

Cierre la puerta de la bomba.

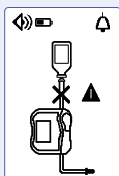


#### Alarma de oclusión de flujo ascendente

Compruebe que el conjunto de bomba no esté obstruido entre el contenedor y la bomba.




#### Mensaje de volumen objetivo casi alcanzado

Continúe con la alimentación o finalícela.

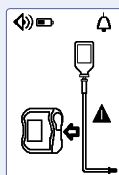


#### Alarma de instalación del conjunto

Compruebe la posición del conjunto encima y debajo del mecanismo de la bomba e insértelo correctamente.

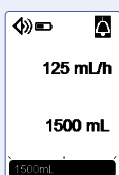


#### Alarma de volumen objetivo alcanzado

Finalice la alimentación.

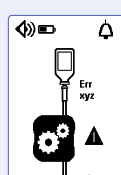

#### Alarma de error de bomba

Anote el código de error técnico (Err xyz) y póngase en contacto con su departamento de biomedicina.

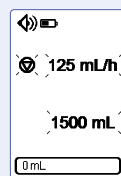

#### Recordatorio de inicio

Proceda con el siguiente paso o apague la bomba.



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

# Amika®

## BOMBA DE NUTRICIÓN ENTERAL GUÍA DE REFERENCIA GRÁFICA



PARA CUALQUIER CONSULTA O INFORMACIÓN, LLAME AL SERVICIO DE ASISTENCIA DOMICILIARIA  
LÍNEA DE AYUDA TELEFÓNICA GRATUITA LAS 24 HORAS DEL DÍA EN EL 0808 100 1990



**FRESENIUS  
KABI**  
caring for life

Fresenius Kabi Limited,  
Cestrian Court, Eastgate Way,  
Manor Park, Runcorn,  
Cheshire WA7 1NT  
tel: 01928 533533 fax: 01928 533520  
correo electrónico: scientific.affairsUK@fresenius-kabi.com  
www.fresenius-kabi.com/gb  
Fecha de preparación: Marzo 2018 EN01046

Amika® es una marca registrada de Fresenius Kabi AG.  
Fresenius Kabi Ltd es un usuario autorizado © Fresenius  
Kabi Ltd.

01



Cierre la pinza en el conjunto de infusión y, a continuación, conéctela al EasyBag o contenedor.

02



Abra la puerta de la bomba.

03



Coloque la pinza del conjunto de infusión en sentido de la flecha descendente hasta que encaje en su sitio.

04



Coloque el tubo del conjunto de infusión dentro de la guía para el tubo.

05



Cierre la puerta, empuje la palanca hasta que quede totalmente bloqueada.

06



Encienda la bomba Amika® pulsando el botón de encendido/apagado.

07



Pulse la tecla de cebado automático y, a continuación, pulse el botón de inicio.

08



Una vez finalizado el proceso de cebado, vuelva a pulsar el botón de inicio.

09



Establezca la velocidad de infusión pulsando las teclas +/- hasta lograr el volumen deseado.

10



Establezca el volumen objetivo pulsando las teclas +/- hasta lograr el volumen deseado.

11



Pulse la tecla de inicio para iniciar la alimentación.

12



Para detener la alimentación en cualquier momento, pulse la tecla Stop. Una vez que haya finalizado la alimentación o haya alcanzado el volumen objetivo, pulse la tecla Stop.

13



Si tiene que restablecer la barra de progreso una vez alcanzado el volumen objetivo, pulse la tecla Stop durante 2-3 segundos.

14



Para apagar la bomba, pulse el botón de encendido/apagado hasta que se complete la cuenta atrás.

