


Vad gör man om ...

Larmsignal ljuder:

 Tysta larmet (vid behov)


Ta reda på orsaken och vidta lämplig åtgärd

 Bekräfta och stäng av larmet  Återuppta näringstillförsel

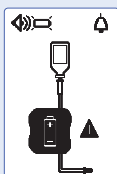


Urladdat batteri

Anslut pumpen till vägguttaget omedelbart.

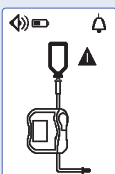


Larm "Tom påse/luft i aggregatet/slangen"

Byt behållare och aggregat/slang, eller kontrollera om luftbubblor uppstått.

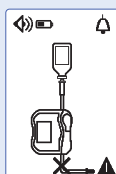


Larm "Oklusion/stopp efter pump"

Kontrollera att inget blockerar aggregatet/matningslangen efter pumpen, på patientsidan.

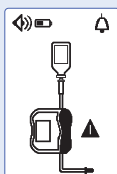

Larm "Luckan är öppen"

Stäng pumpluckan.

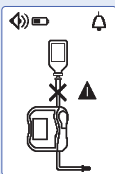


Larm "Oklusion/stopp före pump"

Kontrollera att inget blockerar aggregatet/slangen mellan behållaren och pumpen.




Meddelande "Målvolum nästan uppnådd"

Fortsätt näringstillförsel eller avsluta näringstillförsel.

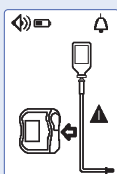


Larm "Aggregatinstallation"

Kontrollera aggregatets/slangens position före och efter pumpmekanismen och installera korrekt.

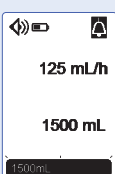


Larm "Målvolum uppnådd"

Avsluta näringstillförsel.

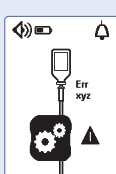

Larm "Tekniskt fel"

Anteckna felkoden (Err xyz) och kontakta avdelningen för medicinsk teknik.

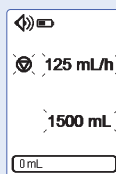

Startpåminnelse

Fortsätt till nästa steg eller stäng av pumpen.



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Amika®

SONDMATNINGSPUMP

ILLUSTRERAD SNABBGUIDE



OM DU HAR FRÅGOR ELLER ÖNSKAR INFORMATION BER VI DIG RINGA HEMHJÄLPEN
RING GRATIS TILL HJÄLPLINJEN PÅ TEL. 0808 100 1990 DYGNET RUNT



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Limited,
Cestrian Court, Eastgate Way,
Manor Park, Runcorn,
Cheshire WA7 1NT
tel: +44 1928 533533 fax: +44 1928 533520
e-post: scientific.affairsUK@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.com/gb
Sammanställningsdatum: Mars 2018 EN01046

Amika® är ett registrerat varumärke tillhörande Fresenius Kabi AG.
Fresenius Kabi Ltd är en behörig användare © Fresenius Kabi Ltd.

01




Stäng slangklämman på aggregatet och anslut det sedan till EasyBag eller behållare.

02



Öppna pumpluckan.

03

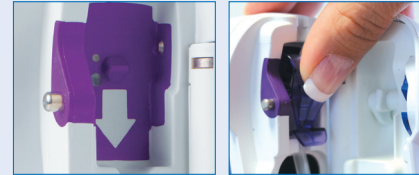

Placera aggregatets slangklämman mot den nedåtgående pilen och tryck tills ett klickljud hörs.

04



För in aggregatslangen i slangskåran så att den sitter rakt.

05



Stäng luckan och tryck ner spaken för att låsa den.

06



Starta Amika®-pumpen genom att trycka på på/av-knappen.

07



Tryck på det automatiska påfyllningsreglaget och tryck sedan på startknappen.

08



När påfyllningen är klar, tryck på startknappen igen.

09



Ställ in flödes hastigheten med knapparna +/- tills önskad volym har uppnåtts.

10



Ställ in målvolyten med knapparna +/- tills önskad volym har uppnåtts.

11



Tryck på startknappen för att starta tillförseln.

12



Tillförseln kan när som helst stoppas med hjälp av stoppknappen. När tillförseln är klar eller målvolyten har uppnåtts, tryck på stoppknappen.

13



Om förloppsfältet behöver återställas sedan målvolyten uppnåtts, tryck på stoppknappen i 2-3 sekunder.

14



För att stänga av pumpen, tryck på på/av-knappen tills nedräkningen är avslutad.

