


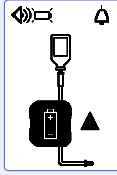
Yapılması gerekenler...

Alarm verilirse:

 Alarmı sustur (gerekirse)


Sebebini tespit edin ve uygun eylemi gerçekleştirin

 Alarmı serbest bırak  Beslemeyi devam ettir




Boş pil

Pompayı derhal şebeke gücüne bağlayın.

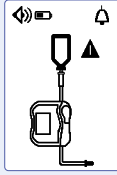


Boş torba veya sette hava alarmı

Konteyneri ve seti değiştirin veya hava kabarcıklarını kontrol edin.

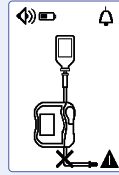


Aşağı akış tıkanıklık alarmı

Hasta tarafında, pompadan sonra pompa seti / besleme borusunun açık olduğunu kontrol edin.

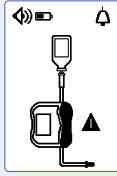


Kapak açık alarmı

Pompa kapağını kapatın.

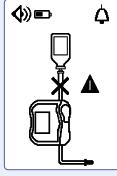


Yukarı akış tıkanıklık alarmı

Pompa setinin konteyner ile pompa arasındaki bölümünün açık olduğunu kontrol edin.

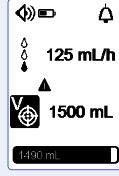


Hedeflenen hacme neredeyse ulaşıldı mesajı

Beslemeye devam edin veya beslemeyi bitirin.

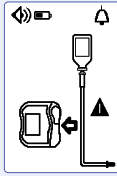


Kurulum alarmını ayarlayın

Pompa mekanizmasının üstünde ve altında setin konumu kontrol edin ve doğru şekilde yerleştirin.

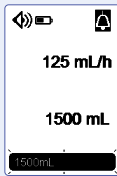

Hedeflenen hacme ulaşıldı alarmı

Beslemeyi bitirin.

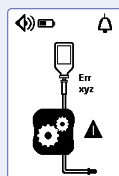

Pompa hatası alarmı

Teknik Hata kodunu (Err xyz) not edin ve biyomedikal departmanınızla iletişime geçin.



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Amika®

ENTERAL BESLENME POMPASI RESİMLİ REFERANS KILAVUZU



**TÜM SORULARINIZ VE BİLGİ TALEPLERİNİZ İÇİN EVDE BAKIMI ARAYIN
24 SAAT ÜCRETSİZ YARDIM HATTI NUMARASI 0808 100 1990**



**FRESENIUS
KABI**
caring for life

Fresenius Kabi Limited,
Cestrian Court, Eastgate Way,
Manor Park, Runcorn,
Cheshire WA7 1NT
tel: 01928 533533 faks: 01928 533520
e-posta: scientific.affairsUK@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.com/gb
Hazırlanma tarihi: Mart 2018 EN01046

Amika®, Fresenius Kabi AG'nin tescilli ticari markasıdır.
Fresenius Kabi Ltd, yetkili kullanımdır © Fresenius Kabi Ltd.

01



Verme setindeki kısıcığı kapatın ve ardından EasyBag veya konteynere bağlayın.

02



Pompa kapağını açın.

03



Verme seti kısıcğını, yerine oturana kadar (klik sesi gelir) aşağı yöndeki ok ile aynı hizada yerleştirin.

04



Verme seti borusunu, boru kılavuzunun içine yerleştirin.

05



Kapağı kapatın, kolu aşağı bastırarak sıkıca yerine kilitleyin.

06



Amika® pompasını açın – on/off (açık/kapalı) düğmesine basın.

07



Otomatik hazırlama düğmesine basın ve ardından başlat/start düğmesine basın.

08



Hazırlama tamamlandığında tekrar başlat/start düğmesine basın.

09



+/- düğmelerine basarak istenen hacme ulaşılan kadar istenen akış hızını ayarlayın.

10



+/- düğmelerine basarak istenen hacme ulaşılan kadar hedeflenen hacmi ayarlayın.

11



Beslemeyi başlatmak için başlat/start düğmesine basın.

12



Herhangi bir noktada beslemeyi durdurmak için durdur/stop düğmesine basın. Besleme bittiğinde veya hedeflenen hacme ulaşıldığında durdur/stop düğmesine basın.

13



Hedeflenen hacme ulaşıldıktan sonra ilerleme çubuğunu sıfırlamanız gerekirse, 2-3 saniyeliğine durdur/stop düğmesine basın.

14



Pompayı kapatmak için, geri sayım tamamlanana kadar on/off (açık/kapalı) düğmesine basın.

