




Beth i'w wneud os...

Os bydd larwm yn seinio:

 Mudo'r larwm (os bydd angen)


Canfod yr achos a chymryd y camau priodol

 Rhyddhau'r larwm  Parhau i fwydo

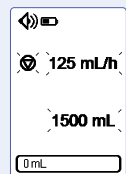


Cychwyn y System Atgoffa

Ewch ymlaen i'r cam nesaf neu diffodwch y pwmp.

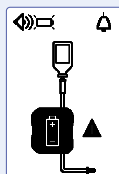


Batri yn wag

Cysylltu'r pwmp i'r cyflenwad trydan yn syth.

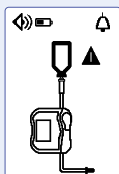


Larwm bag yn wag/ aer yn y set

Newid y cynhwysydd a'r set neu wirio am swigod aer.

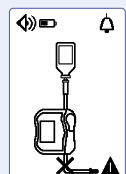


Larwm rhwystr yn is i lawr

Gwiriwch fod set y pwmp / tiwb bwydo yn glir ar ôl y pwmp, wrth ochr claf.

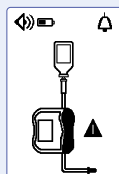


Larwm drws yn agored

Cau drws y pwmp.

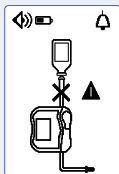


Larwm rhwystr yn uwch i fyny

Gwiriw bod set y pwmp yn glir rhwng y cynhwysydd a'r pwmp.

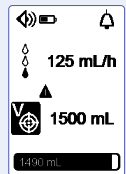


Neges bron â chyrraedd y cyfaint targed

Parhau neu roi'r gorau i fwydo

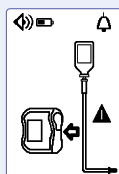


Larwm gosodiad y set

Gwiriwch safle gosodedig uwchben ac islaw mecanwaith pwmp a'i roi i mewn yn gywir.

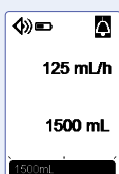

Larwm cyrraedd y cyfaint targed

Rhoi'r gorau i fwydo.

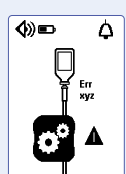

Larwm nam ar y pwmp

Nodwch y cod Gwall technegol (Err xyz) a chysylltwch â'ch adran biofeddygol.



FRESENIUS KABI

caring for life

Amika®

PWMP MAETH ENTERIG

CANLLAW CYFEIRNOD DARLUNIADOL



AR GYFER UNRHYW YMHOLIADAU NEU WYBODAETH FFONIWCH LLINELL GYMORTH RHADFFÔN 24 AWR GOFAL CARTREF AR 0808 100 1990




FRESENIUS KABI

caring for life

Fresenius Kabi Limited,
Cestrian Court, Eastgate Way,
Manor Park, Runcorn,
Cheshire WA7 1NT
tel: 01928 533533 fax: 01928 533520
email: scientific.affairsUK@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.com/gb
Dyddiad paratoi: Mawrth 2018 EN01046

Mae Amika® yn nod masnachu cofrestredig i Fresenius Kabi AG.
Mae Fresenius Kabi Ltd yn ddefnyddiwr awdurdodedig © Fresenius Kabi Ltd.

01

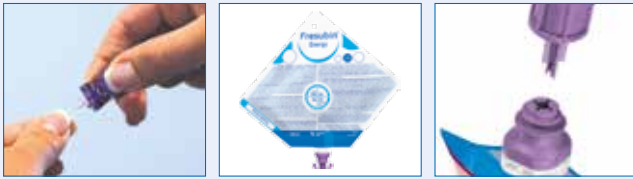

Caewch y clamp pinsio ar y set rhoi ac yna Cysylltwch â'r EasyBag neu gynhwysydd.

02



Agorwch ddrws y pwmp.

03



Gosodwch glamp pinsio y set rhoi yn unol â'r saeth i lawr hyd ei fod yn "clicio" yn ei le.

04



Rhowch y tiwb set rhoi yn syth y tu mewn i'r canllaw tiwb.

05




Caewch y drws, gwthiwch y lifer i lawr i'w gloi yn gadarn yn ei le.

06



Rhoi'r pwmp Amika® ymlaen - gan bwysu'r Botwm ymlaen/i ffwrdd.

07

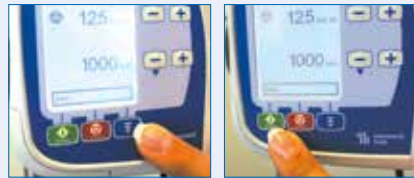

Pwyswch yr allwedd preimio awtomatig, ac yna pwyswch y botwm cychwyn.

08



Pan mae preimio wedi'i gwblhau, pwyswch y botwm cychwyn eto.

09



Gosodwch y raddfa lifa a ddymunir wrth bwysu'r allweddau +/- hyd bod y cyfaint a ddymunir yn cael ei gyrraedd.

10



Gosodwch y cyfaint targed wrth bwysu'r allweddau +/- hyd y cyrhaeddir y cyfaint boddhaol.

11



Pwysu'r allwedd cychwyn i dechrau bwydo.

12



I stopio bwydo ar unrhyw adeg, pwyswch yr allwedd stop. Pan mae bwydo wedi gorffen neu fod eich cyfaint targed wedi ei gyrraedd, pwyswch yr allwedd stop.

13



Os oes angen i chi ailosod y bar cynnydd ar ôl i'r cyfaint targed gael ei gyrraedd, pwyswch yr allwedd stop am 2-3 eiliad.

14



I ddiffodd y pwmp pwyswch y botwm ymlaen/i ffwrdd hyd bod y cyfrif i lawr wedi ei gwblhau.

