

## 1. Förberedelser



Gör en handdesinfektion. Följ era lokala hygienföreskrifter.



Välj den produkt som förskrivits, kontrollera att det är rätt produktnamn på påsen. I det svarta fältet på EasyBagen kan ni finna utgångsdatum.



Kontrollera att påsen inte är skadad. Använd inte om påsen är uppsvåld eller om innehållet har klumpat ihop sig.



Skaka påsen ordentligt för att säkerställa att innehållet blandas ordentligt innan aggregatet kopplas till EasyBagen.

## 2. Koppla aggregatet till EasyBag

Aggregatet kan kopplas till EasyBag i stående och hängande position tack vare det unika membranet i porten.



Ta bort det vingformade skyddslocket på porten. EasyBagen kan öppnas både hängande och stående på grund av det återförslutande membranet.



Öppna förpackningen på aggregatet genom att dra hörnen i den nedre delen ifrån varandra. Ta bort skyddshatten eller VarioLine adaptern, om sådan finns, från spetsen på aggregatet.



Stäng rullklämma eller pumpklämma på aggregatet. Koppla aggregatet till EasyBag utan att vidröra spetsen på aggregatet eller porten på EasyBagen.



Skruva åt ordentligt så att anslutning blir säker.



Fyll aggregates droppkammare till hälften.

## 3. Gravitationsmatning / pumpmatning



EasyBag kan kopplas till  
► aggregat för gravitationsmatning  
► aggregat för pumpmatning efter behov enligt det som förskrivits.



Vid gravitationsmatning: fyll slangen med sondnäring för att säkerställa att ingen luft administreras. Justera rullklämma för att uppnå föreskriven flödes hastighet.




Vid gravitationsmatning: kontrollera flödet regelbundet och justera rullklämman vid behov.



Vid pumpmatning: installera aggregatet i pumpen och fyll aggregatet enligt pumpens anvisningar. Programmera pumpens hastighet enligt det som förskrivits.

## 4. Koppla bort aggregatet från EasyBag

Aggregatet kan kopplas till EasyBag i stående och hängande position tack vare det unika membranet i porten.

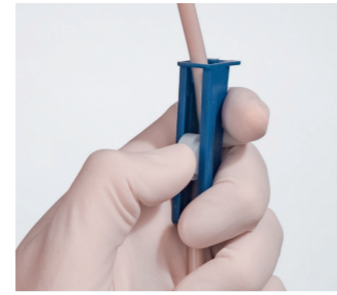

Stäng flödet i aggregatet genom att stänga rullklämman, eller med den fasta klämman. Koppla bort aggregatet från patientens enterala infart och spola infarten med vatten enligt lokala föreskrifter.



Skruva av aggregatet från påsens port.



Ta bort aggregatet från EasyBagens port och kassera det.



Inget läckage/vätskeflöde sker tack vare det återförslutande membranet. Finns kvarvarande sondnäring skyddas den från syre och kontamination.

## 5. Avbrott i sondmatningen

Öppnad EasyBag kan förvaras i rumstemperatur (15-25° C) i 24 timmar från öppnandet, tack vare det unika återförslutande membranet. Detta förutsätter dock en god hygienhantering, se ovan.



### Koppla bort aggregatet

Stäng av pumpen alternativt stäng rullklämman på aggregatet. Skruva av aggregatet från EasyBagens port, ta bort aggregatet och kassera det. EasyBag kan hänga kvar maximalt 24 timmar från öppnandet.



### Återuppta sondmatningen

Gör en handdesinfektion och använd ett nytt aggregat, kontrollera att förpackningen är hel. Om det återförslutande membranet i EasyBag-påsen (som sitter väl skyddat längre in i porten) har blivit kontaminerat kan membranet desinfekteras. Koppla aggregatet till EasyBag och patientens enterala infart enligt anvisningarna.



## 6. Bolusmatning



Ta bort det vingformade skyddslocket på porten vilket garanterar att EasyBagen är öppen.



Öppna förpackningen på aggregatet genom att dra hörnen i den nedre delen ifrån varandra. Ta bort skyddshatten eller VarioLine adaptern, om sådan finns, från spetsen på aggregatet.



Koppla samman spetsen på bolusadaptern med porten på EasyBagen och skruva åt.



Koppla samman sprutan till adaptern och dra upp sondnäringen i sprutan.



Bolusadaptern och Easy Bagen kan vara sammankopplade tills nästa användning. Kassera båda efter 24 timmar.