

CATSmart®

Das kontinuierliche Autotransfusionsystem.
Smart transfudieren. Digital dokumentieren.

Die Konnektivitätsfunktionen unserer CATSmart ermöglichen die kabellose Datenerfassung sowie Übertragungsoptionen über WiFi.

Eine volle Abwärtskompatibilität für alle CATSmart-Geräte ist gewährleistet.

Unsere Kommentarfunktion erlaubt eine freie Texteingabe für zusätzliche Dokumentation, um den steigenden Anforderungen an die Berichterstattung gerecht zu werden.

CATSmart WLAN Upgrade Kit:

ArtikelNr.: 9005822




Die Datenausgabe in den Formaten ASCII, JSON, TXT und PDF direkt an den Krankenhausserver erfordert keine Middleware und reduziert den manuellen Dokumentationsaufwand.

Autotransfusionsprotokoll CATSmart

Reason	Beschreibung Verfahrenende	Operator_ID	Zeigt die Operator_ID
Date	Datum der Prozedur	Operation_ID	Zeigt die Operation_ID
Time	Uhrzeit der Prozedur	Patient ID	Zeigt die Patient ID
Serial No	Serialnummer des Gerätes	Blood	Gewaschenes Blutvolumen
SW Vers.	Softwareversion des CATSmart Gerätes	Saline	Verwendete Kochsalzlösung
CDP	Batch Nummer der CPD Lösung	PRC	Gesammeltes Konzentratvolumen
Heparin	Batch Nummer der Heparin Lösung	HCT_in_GUI	aktueller HKT Wert in %
Disposable Batch no	Batch Nummer des Aufbereitungssets	HCT out GUI	errechneter HKT Wert in % im gesammelten Konzentrat
Disposable Article no	Artikelnummer des Aufbereitungssets	Vac max	Maximal verwendetes Vakuum (interne Vakuumpumpe)
Reservoir Batch no	Batch Nummer des Sammelreservoir	Duration Wash	Zeit des Waschvorganges
Reservoir Article no	Artikelnummer des Sammelreservoir	Save final PRC	Zeit der finalen Sammelphase des Konzentrats
Suction Batch no	Batch Nummer der Saugleitung	Total	Gesamtzeit
Suction Article no	Artikelnummer der Saugleitung	Comments	Zeigt alle Kommentare

Die Partnerschaft zwischen Fresenius Kabi und der TZM GmbH ermöglicht eine HL7 Systemintegration unseres CATSmart Autotransfusionsgerätes.

Die TZM GmbH ermöglicht eine **HL7**-Integration über das Universal Medical Gateway (UMG) in das Patientendatenmanagementsystem (PDMS) sowie in andere klinische Systeme.¹

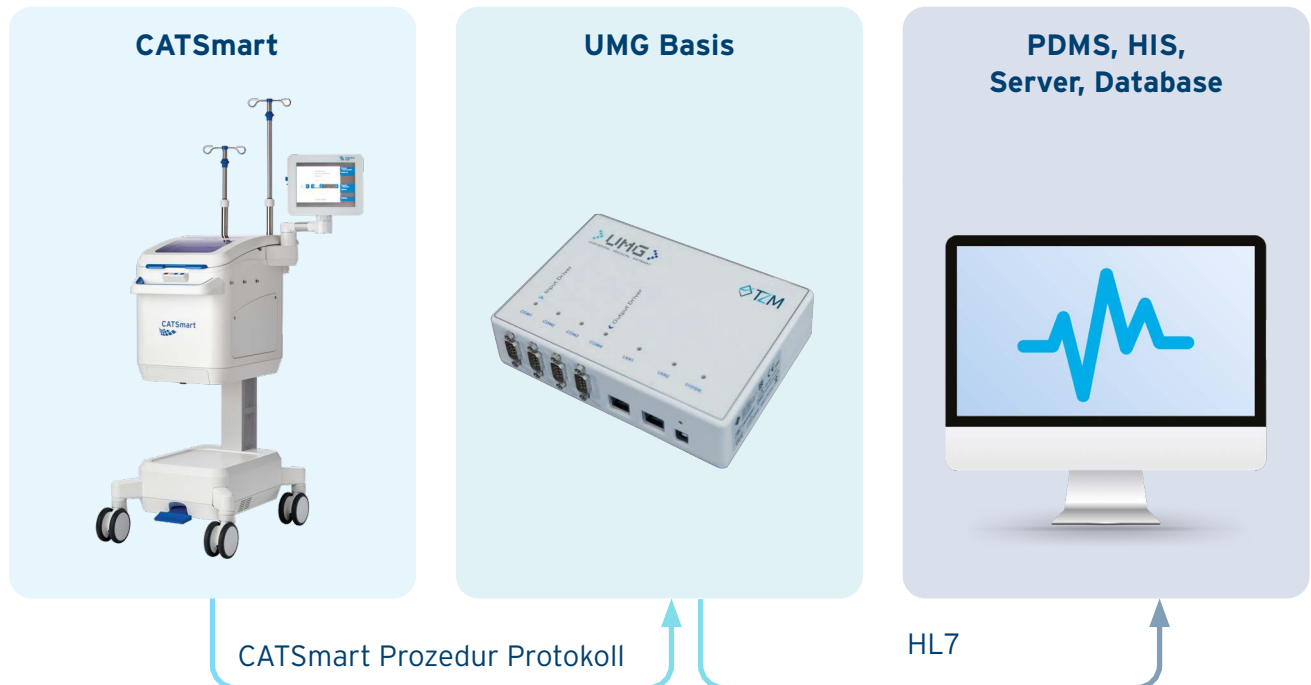

Einfache Implementierung

Gerätekommunikation auf Basis von Industriestandards.²



Datenintegration

Flexible Integration von Gerätedaten in PDMS, KIS und Datenbanken.

1. Die HL7-Integration ist kein Teil des Fresenius Kabi Leistungsumfang. Anbindung, Vertrieb und Aftersales Service erfolgen über die TZM GmbH.

2. Vollständige Beschreibung der Datenausgabe finden Sie in der Schnittstellenbeschreibung CATSmart

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Fresenius Kabi Ansprechpartner.
CATSmart Connectivity Software 01.04.xx ist nicht in allen Sprachen verfügbar.

Weitere Informationen zu TZM UMG finden Sie auf der Website www.tzm.de.



**FRESENIUS
KABI**

Fresenius Kabi AG
Else-Kroener Str. 1
61346 Bad Homburg
Phone: +49 (0) 6182686-4913
www.fresenius-kabi.com
autotransfusion@fresenius-kabi.com

7704081/0 (10.25 AC)