

Do wszystkich zainteresowanych

**Fresenius Kabi Polska
Sp. z o.o.**

Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Polska
T +48 (22) 345 67 89
F +48 (22) 345 67 87
www.fresenius-kabi.pl

Warszawa, 22 czerwca 2018 roku


Informacja o zmianie końcówki Luer Lock na ENFit w zgłębnikach nosowo- żołądkowych typu Freka®

Przypadkowe podłączenie zestawu do podaży żywienia dojelitowego do linii dożylniej (IV) stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pacjenta.

Fresenius Kabi we współpracy z producentami, dystrybutorami oraz dostawcami sprzętu do podaży żywienia dojelitowego zrzeszonymi w ramach Globalnego Stowarzyszenia Dostawców Urządzeń do Żywienia Dojelitowego (GEDSA), podjął działania na rzecz opracowania systemu połączeń zestawów do żywienia dojelitowego, zapobiegającemu niewłaściwej podaży płynów. W efekcie działań podjętych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów został opracowany nowy standard ISO 80369-3 dla złączy z otworami o małej średnicy, zwanych **ENFit**.

W celu zapewnienia pełnej zgodności oferowanych zgłębników do podaży diet dojelitowych z nowym standardem ISO oraz w trosce o najwyższy poziom bezpieczeństwa pacjentów, Fresenius Kabi wprowadza zgłębniki nosowo-żołądkowe typu Freka® wyposażone jedynie w końcówkę **ENFit**.

Nowy system połączeń zgłębników i zestawów do żywienia dojelitowego **ENFit** został opracowany po to, aby zapobiec przypadkowemu, błędnemu podłączeniu systemów do żywienia dojelitowego do systemu dożylnego (IV). **ENFit** jest kompatybilny wyłącznie z systemami do podaży dojelitowej, dzięki czemu zmniejsza ryzyko niewłaściwego połączenia.

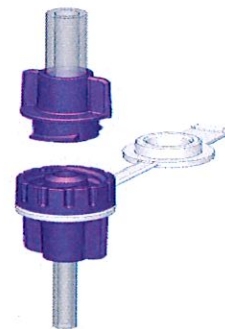

Zgłębniki nosowo-żołądkowe typu Freka® wyposażone z końcówką ENFit będą dostępne w sprzedaży od lipca 2018 roku. Cena zgłębników do podaży diet dojelitowych z końcówką ENFit pozostaje niezmienna.


Zamieszczona poniżej Tabela 1 przedstawia wykaz aktualnie dostępnych zgłębników nosowo-żołądkowych Freka® ENFit oraz zamianę aktualnych zgłębników nosowo-żołądkowych typu Freka® na zgłębniki wyposażone jedynie w końcówkę ENFit:

Tabela 1

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Nr katalogowy (ENFit)	Nazwa produktu
7981691	Freka CH/FR 8 120 cm LL - zgłębnik w wersji żołądkowo-dwunastniczej	7981840	FREKA TUBE FR 8, 120 CM, linear ENFit
7981811	Freka CH/FR 12 120 cm LL - zgłębnik w wersji żołądkowo-dwunastniczej	7981843	FREKA TUBE FR 12, 120 CM, linear ENFit
-----	-----	7981842	FREKA TUBE FR 10, 120 CM, linear ENFit

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Tel. 48(22)345 67 89, fax 48(22)345 67 87
NIP 521-29-35-353. REGON 013231488

Z poważaniem,

Marta Leszczyńska-Szypuła
Kierownik ds. Produktu
Żywienie Dojelitowe