


Transfusion Technology

CompoFlex®

Sistemas flexíveis de Bolsas de Sangue

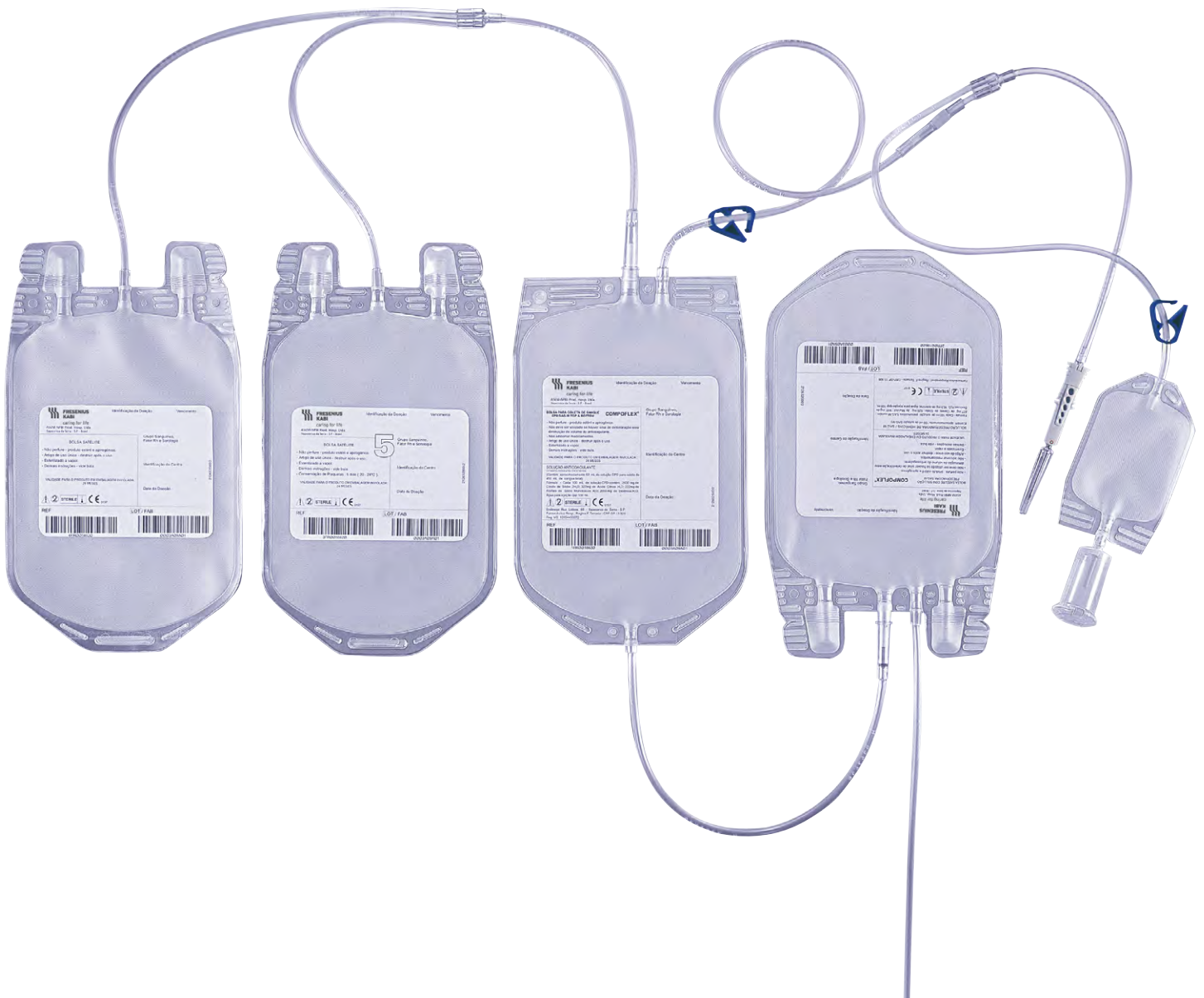

CompoFlex®

Bolsas de coleta de sangue para preparação de hemocomponentes em sistemas fechados

- Convencionais.
- TAB (Top and Bottom) com saída superior e inferior.

A utilização deste sistema proporciona a obtenção de concentrados de hemácias depletados de buffy coat e facilita a padronização de processos de separação para obtenção de produtos de elevada pureza e baixa contaminação leucocitária.

Vantagens do Sistema TAB

- Reduz a taxa de imunização e incidência da reação febril não hemolítica pós transfusional e de reações alérgicas em pacientes politransfundidos, pela baixa contaminação de leucócitos e plasma no concentrado de hemácias (até 90% de redução de leucócitos).
- Permite a preparação de concentrados de plaquetas de alta pureza a partir do buffy coat com mínimo índice de agregação plaquetária.
- Obtenção de plaquetas com menor contaminação de hemácias e leucócitos, quando comparado à metodologia do PRP (Plasma Rico em Plaquetas).
- Elimina a necessidade de procedimentos trabalhosos de lavagem do concentrado de hemácias em mais de 90% dos casos.

Vantagens da Solução SAG-Manitol

- Melhora a preservação das hemácias, com uma redução na taxa de hemólise.
- Melhora a fluidez durante a transfusão.
- Facilita os procedimentos de filtração para a remoção de leucócitos.
- Permite a remoção da camada de buffy coat, reduzindo a contaminação de leucócitos e a formação de microagregados.




Bolsa Satélite

- Plastificante (DEHP ou TOTM).



- Agulha retrátil (maior segurança para o usuário)

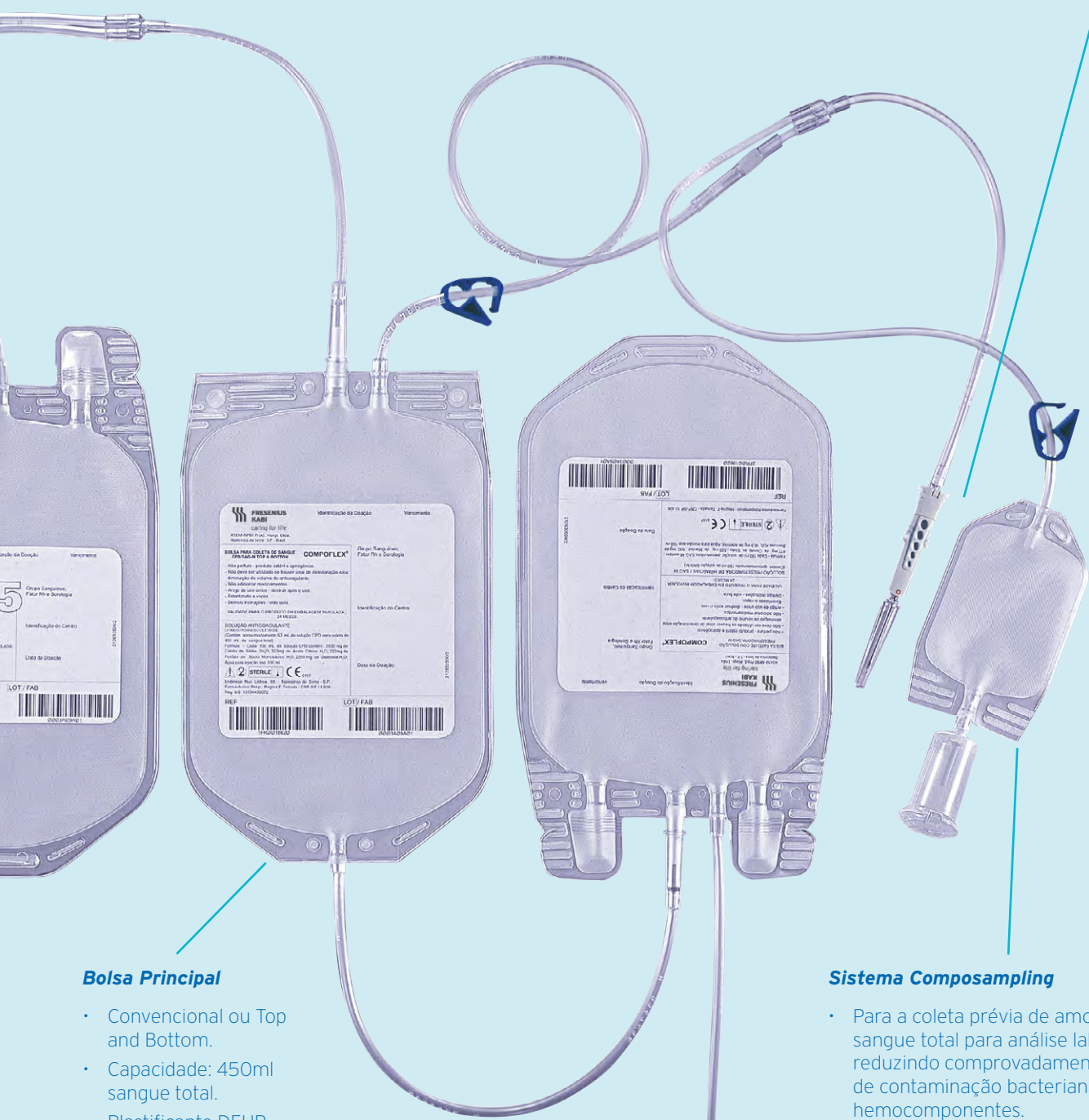


Bolsa Principal

- Convencional ou Top and Bottom.
- Capacidade: 450ml sangue total.
- Plastificante DEHP.

Sistema Composampling

- Para a coleta prévia de amostras de sangue total para análise laboratorial, reduzindo comprovadamente o índice de contaminação bacteriana nos hemocomponentes.

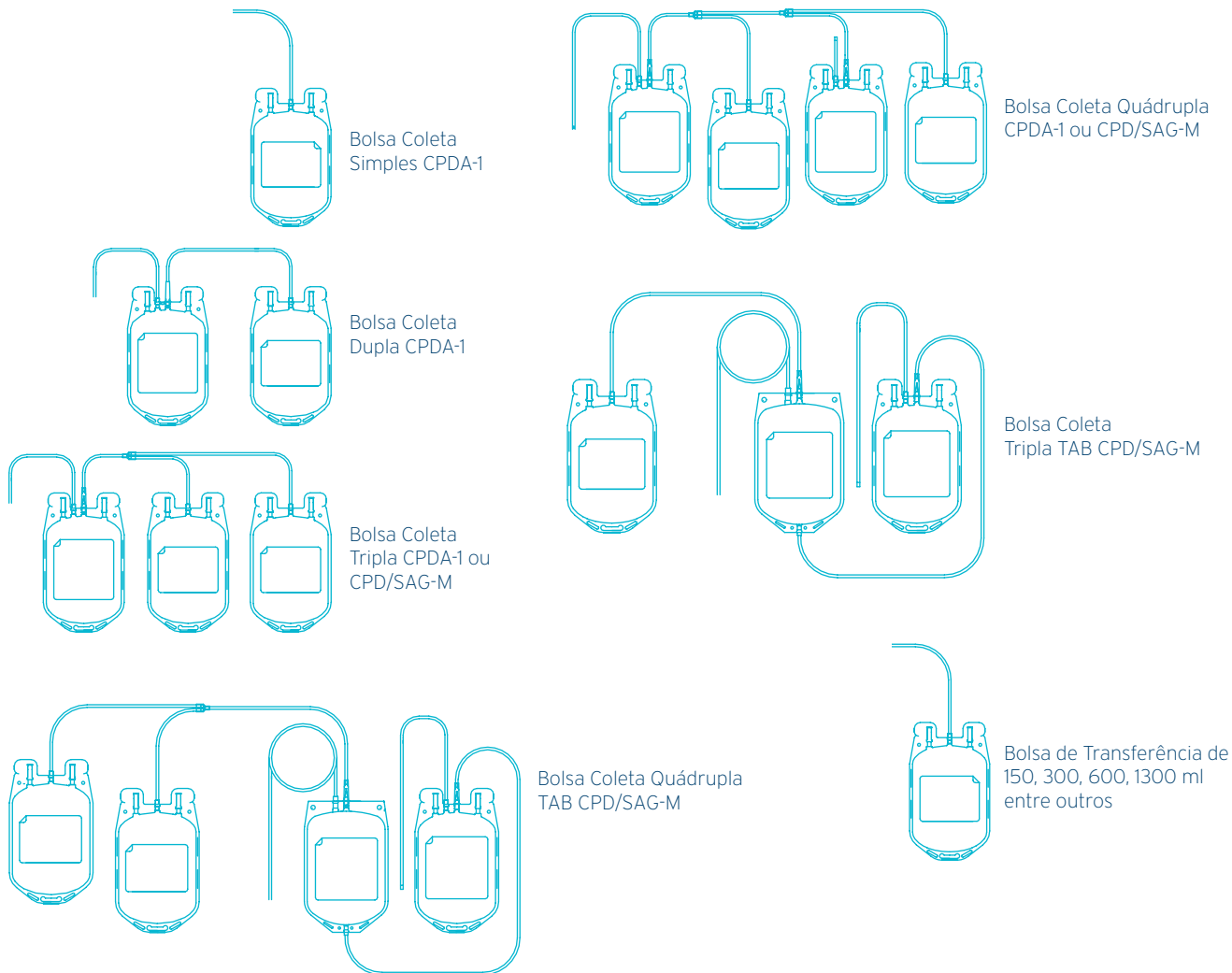

Libra Propaganda

Acessórios



1. Sistema Composampler
2. Sistema Composampling

Sistemas para coleta de amostras para testes sorológicos e imunohematológicos

Sistema Compobact

Sistema para coleta de amostras para testes microbiológicos



Ficha Técnica

Descrição	Reg. ANVISA
Bolsa para Coleta de Sangue CPD/SAG-M com Plastificantes DEHP	10154450073
Bolsa para Coleta de Sangue CPD/SAG-M com Plastificantes DEHP e TOTM	10154450072
Bolsa para Coleta de Sangue CPDA-1 com Plastificantes DEHP e TOTM	10154450085
Bolsa para Coleta de Sangue CPDA-1 com Plastificante DEHP	10154450076
Bolsa para Transferência de Sangue e Seus Componentes	10154450007

Informações sobre pedidos

Para mais informações como literatura, detalhes técnicos, instruções de trabalho, bem como equipamento, por favor contate-nos.