



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

# Agilia® ProNeo®

Bomba de Seringa  
para Nutrição





**Agilia®** ProNeo®

## Bomba de Nutrição Enteral para Neonatologia e Pediatria.

Agilia® ProNeo® é uma bomba de seringa dedicada para Nutrição Enteral em unidades de cuidados neonatais e pediátricos.

Cor, rotulagem e configurações específicas tornam a Agilia® ProNeo® exclusivamente projetada para a via enteral.

# Protegendo para Crescer

## Intuitiva

- Facilidade na programação;
- Indicador de status de infusão luminoso para um monitoramento rápido;
- Fácil navegação pelo menu.



Bomba de Nutrição Enteral para Neonatos  
Reg. ANVISA: 80145119029

## Versátil

- Compatível com as seringas Freka® Connect e uma ampla gama de seringas enterais;
- Configurações personalizáveis da bomba;
- Detecção automática da marca e tamanho da seringa.



## Segurança

- Gerenciamento avançado de pressão;
- Alta precisão da taxa de fluxo ( $\pm 3\%$ \*);
- Anti-bolus após oclusão.




(\*)  $\pm 1\%$  Bomba,  $\pm 2\%$  Seringa



## Descartáveis

- Os Extensores ProNeo® devem ser utilizados na conexão com uma sonda de alimentação ProNeo® para alimentação e/ou medicação enteral, sendo compostos por um tubo, um clamp e uma tampa de proteção para evitar vazamentos;
- Os extensores estão disponíveis em dois comprimentos: 30 cm e 120 cm.

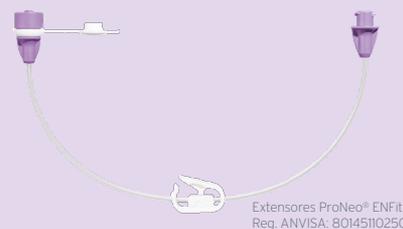

### • Seringa ProNeo® - com conexão ENFit

- » Reduz o risco de erros de conexão;
- » Indicada para Infusão Gravitacional, Infusão em Bolus e Infusão por Bomba de Alimentação.
- » Apresentações: 1 mL, 2.5 mL, 5 mL, 10 mL, 20 mL, 60 mL e 100 mL.



Reg. ANVISA: 80145119021



## Freka® Cap, ENFit/ProNeo®, steriel

Tampa de rosquear com conexão ENFit indicada para evitar extravasamento e/ou contaminação do conteúdo aspirado mantido dentro das seringas Freka® Connect ENFit/ProNeo®.



## Produtos Específicos ProNeo®

Conexão segura e dedicada das Seringas ENFit/ProNeo®



## Sondas ProNeo®

Material poliuretano - macio e transparente, com superfície delicada para facilitar a passagem/inserção.



## Marcações a cada centímetro

• Registro da profundidade de inserção do tubo.

## Listras radiopacas

• Facilidade de visualização no Raio-X.

## Impressão no tubo

• Facilidade de identificação do tamanho do tubo.

## Etiqueta do paciente

• Documentação da fixação do tubo.

## Adesivo de fixação

• Para pele sensível.

## Quatro tamanhos

• 4 FR, 5 FR, 6 FR e 8 FR com comprimentos diferentes.

## Tampas coloridas

• Fácil identificação de tamanhos.

## Extensores ProNeo®

Material de poliuretano - macio e transparente

## Clamp do tubo

- Evita vazamento durante a preparação/armazenamento;
- Extensor de 120 cm para alimentação em bomba;
- Extensor de 30 cm para alimentação gravitacional.

## Seringas ProNeo® Com o conector ENFit

- Reduz o risco de erros de conexão;
- Indicado para gravidade, bolus e bomba de infusão.



## Seringas ProNeo® ENFit de baixa dosagem

- Para evitar o volume morto e fornecer medição precisa dedicada para o uso em unidades de cuidados neonatais;
- Tamanhos: 1 mL, 2,5 mL e 5 mL.



## Adesivo ProNeo®

• Para fixação do tubo na bochecha.



	Produto	Comprimento do Tubo	Cor da Tampa	Código	Quantidade por Caixa
<b>Sonda Transnasal</b> Sonda ProNeo® ENFit Reg. ANVISA: 80145110249	ProNeo® Feeding Tube FR 4	40 cm	Verde	7752010	10 x 1
		50 cm		7752022	10 x 1
		70 cm		7752023	10 x 1
	ProNeo® Feeding Tube FR 5	40 cm	Azul	7752024	10 x 1
		50 cm		7752009	10 x 1
		70 cm		7752026	10 x 1
	ProNeo® Feeding Tube FR 6	40 cm	Amarelo	7752027	10 x 1
		50 cm		7752008	10 x 1
		70 cm		7752028	10 x 1
	ProNeo® Feeding Tube FR 8	120 cm	Branco	7752029	10 x 1
		50 cm		7752030	10 x 1
	<b>Extensor</b> Extensores ProNeo® ENFit Reg. ANVISA: 80145110250	ProNeo® Extension Set, 30 cm	30 cm	-	7752006
ProNeo® Extension Set, 120 cm		120 cm	-	7752005	30 x 1
<b>Seringa Freka® Connect ENFit/ProNeo® (baixa dosagem)</b> Reg. ANVISA: 80145119021	Freka® Connect ENFit/ProNeo® LDT, 1 mL	-	-	9000788LDT	30 x 1
	Freka® Connect ENFit/ProNeo® LDT, 2,5 mL	-	-	9000782LDT	30 x 1
	Freka® Connect ENFit/ProNeo® LDT, 5 mL	-	-	9000783LDT	30 x 1
<b>Seringa Freka® Connect ENFit/ProNeo®</b> Reg. ANVISA: 80145119021	Freka® Connect ENFit/ProNeo®, 10 mL	-	-	9000784S	30 x 1
	Freka® Connect ENFit/ProNeo®, 20 mL	-	-	9000785S	30 x 1
	Freka® Connect ENFit/ProNeo®, 60 mL	-	-	9000786S	30 x 1
	Freka® Connect ENFit, 100 mL	-	-	9000787	30 x 1
<b>Seringa Freka® Cap, ENFit/ProNeo®, steriel</b> Reg. ANVISA: 80145119021	Freka® Cap, ENFit/ProNeo®, steriel	-	-	BRL7981402	1 x 30

Agilia® é uma marca registrada da Fresenius Kabi em países selecionados. Devido à nossa política de desenvolvimento contínuo de produtos bem como as alterações nas normas, as características descritas estão sujeitas a alterações. Entre em contato conosco para obter as informações mais atualizadas.



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Brasil Ltda.  
CNPJ: 49.324.221/0001-04  
Av. Marginal Projetada, 1652  
CEP: 06460-200 • Tamboré • Barueri, SP  
Tel.: 11 2504.1400 • SAC: 0800 707 3855  
www.fresenius-kabi.com.br