




**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Freka[®] Trelumina ENFit

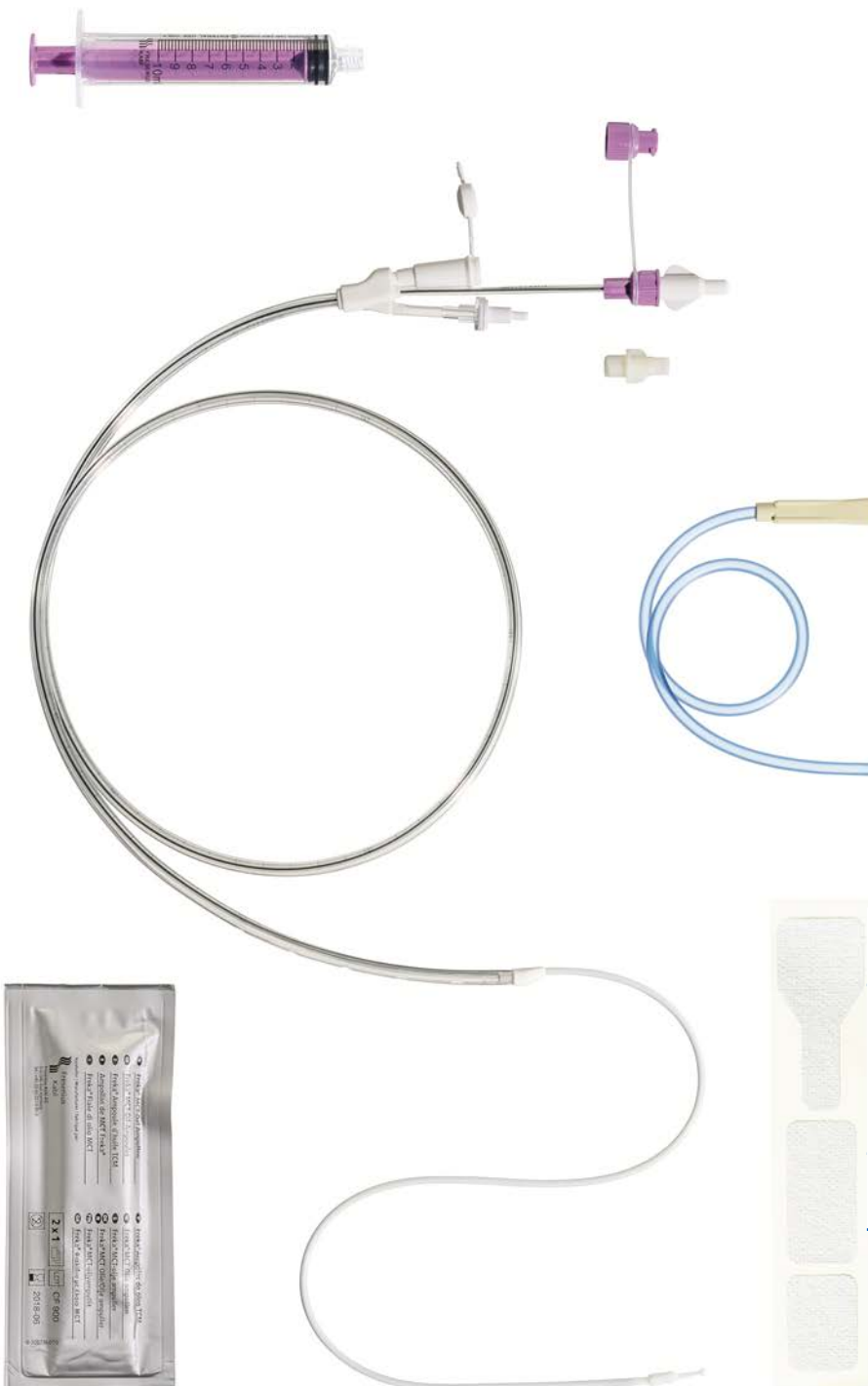

Freka Trelumina ENFit

Nasogastrisk ernæringssonde med tredobbelt lumen til ernæring i jejunum og drænage af ventriklen

Varenr. 7981834

Freka® Trelumina ENFit

En blød sonde til nasojejunal og gastrisk anvendelse til placering i tyndtarm og ventrikel via endoskop eller røntgen.

- Trelumensonden muliggør samtidig tilførsel af ernæring i tyndtarmen og drænage fra ventriklen
- Fremstillet af vævsvenlig polyuretan
- Røntgentæt hvilket muliggør kontrol af sondens placering
- Den teflonbelagte guidewire er let at fjerne. Guidewiren har en åbning, der muliggør både tilførsel af kontraststof og kontrol af placering, mens guidewiren stadig er i sonden
- Gastrosonden har en afrundet distal ende med fem laterale åbninger. Intestinalsonden har en afrundet distal ende med to laterale åbninger. Dette garanterer god indløbshastighed og minimerer risikoen for tilstopning af sonden
- Afstandsmarkering hver 5. centimeter muliggør kontrol af sondens placering, og gør det lettere at indføre sonden
- Anvendelsesperiode: Op til 6 uger
- Pakningsstørrelse: 5 stk.
- Varenr. 7981834

Produkt	Indre diameter	Ydre diameter
Freka Trelumina, CH 16/9, 150 cm, ENFit	4,1 mm	5,3 mm
• Intestinalsonde, CH 9, 150 cm	1,9 mm	2,9 mm
• Gastrosonde, CH 16, 95 cm	4,1 mm	5,3 mm
• Udluftningskanal	1,2 mm	

EN/0102_Maj 2017



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi
Islands Brygge 57
2300 København S
Telefon 3318 1600
www.fresenius-kabi.dk