


ProNeo's unike egenskaper

ProNeo produktene er designet for å kunne tilføre enteral ernæring på en trygg og sikker måte på nyfødt intensiv avdelinger.

ProNeo produktene er iht. ISO 80369-3.

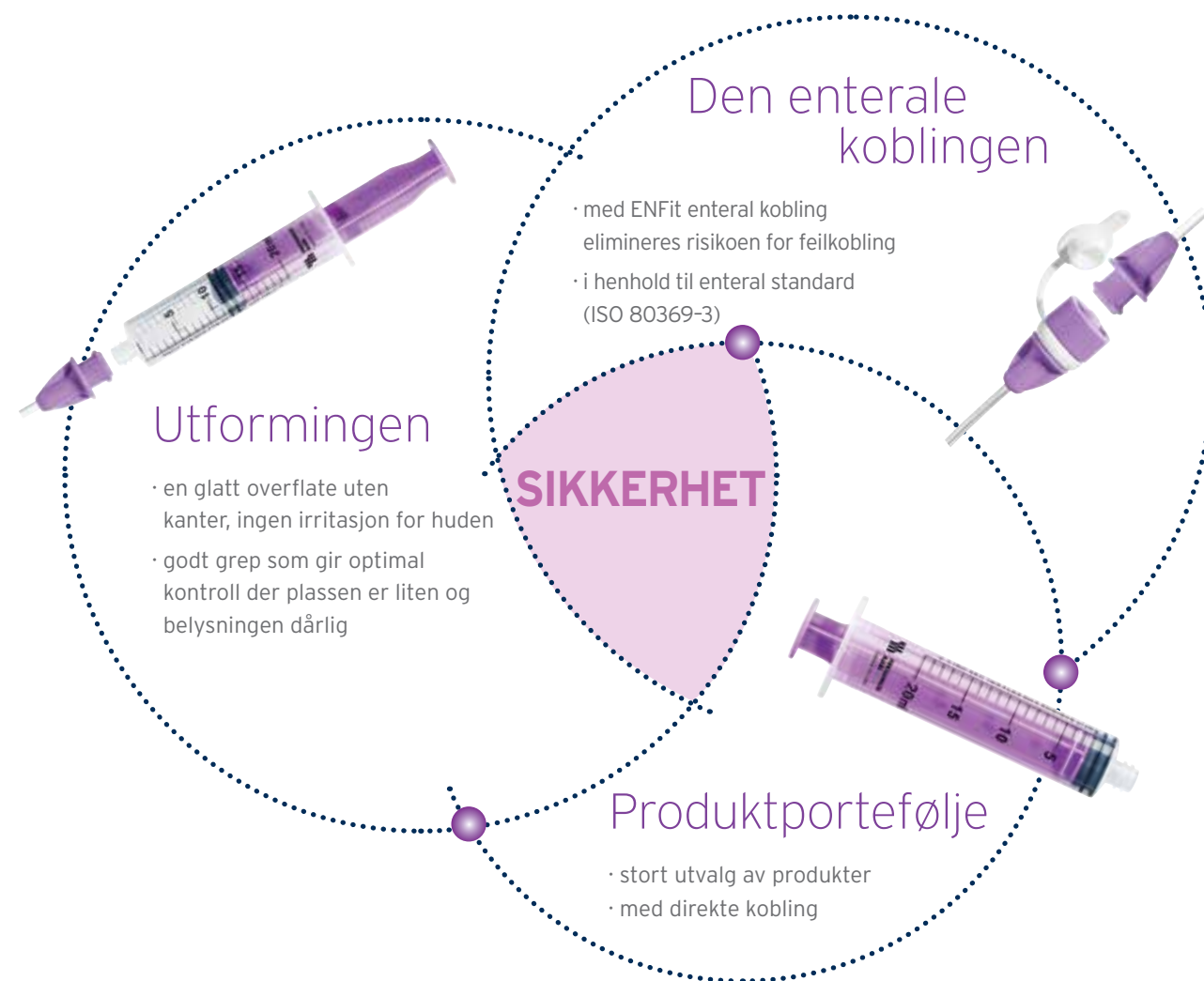

ProNeo koblingen eliminerer muligheten for feilkobling mellom enteral og ikke enteral tilkobling iht. ISO 80369-3.

Bestillingsinformasjon	Produkt	Artikkelnummer	Pakningsstørrelse
Transnasale ernæringssonder	ProNeo ernæringssonde FR 4	7752010	10 x 1
	ProNeo ernæringssonde FR 5	7752009	10 x 1
	ProNeo ernæringssonde FR 6	7752008	10 x 1
	ProNeo ernæringssonde FR 8	7752007	10 x 1
Forlengelsessett	ProNeo forlengelsessett, 30 cm	7752006	30 x 1
	ProNeo forlengelsessett, 120 cm	7752005	30 x 1
Enterale ENFit sprøyter LDT sprøyter for bruk ved lav dose	Freka® Connect ENFit/ProNeo LDT, 1 ml	9000788LDT	30 x 1
	Freka® Connect ENFit/ProNeo LDT, 2,5 ml	9000782LDT	30 x 1
	Freka® Connect ENFit/ProNeo LDT, 5 ml	9000783LDT	30 x 1
Enterale sprøyter med ENFit kobling	Freka® Connect ENFit/ProNeo, 10 ml	9000784	100 x 1
	Freka® Connect ENFit/ProNeo, 20 ml	9000785	100 x 1
	Freka® Connect ENFit/ProNeo, 60 ml	9000786	50 x 1
	Freka® Connect ENFit, 100 ml	9000787	30 x 1
	Freka® sprøyteCap ENFit/ProNeo, sterile	7981402	30 x 1
	Freka® sprøyteCap ENFit, usterile	7981403	30 x 1
	ProNeo opptreksstrå, 10 cm	7752017	30 x 1
Tilbehør	ProNeo opptreksstrå, 15 cm	7752016	30 x 1
	ProNeo opptrekskanyle, 5 cm	7752012	30 x 1
	ProNeo sprøyteadapter	7752014	100 x 1
	ProNeo sprøyteetiketter	7752018	100 x 1
	ProNeo medisineringsadapter	7752004	30 x 1
	ProNeo melkeflaskeadapter	7752003	30 x 1
	VarioFlaske adapter	7752015	30 x 1
	ProNeo multifunksjonell sprøytehet	7752002	30 x 1

ProNeo

Sikker administrering av enteral ernæring

© Fresenius Kabi Deutschland GmbH. Reproduksjon og distribusjon - kun etter skriftlig forhånds godkjenning





sikker enteral ernæring

Fokus på økt sikkerhet på nyfød- og barneavdelinger

ProNeo produktene er designet for å eliminere feilkobling av enteral ernæring til intravenøse infusjonssystemer eller Luer-baserte systemer. Derfor har Fresenius Kabi sammen med andre leverandører av enteral ernæring deltatt i utviklingen av en ISO-standard (80369-3), kalt ENFit™.



ProNeo sortimentet består av:

ProNeo sortimentet har alt nødvendig tilbehør innen enteral ernæring til administrering av ernæring, væske og medisiner. For mating via sonde ved hjelp av gravitasjon, bolusmating eller ved hjelp av pumpe, har ProNeo det utvalget du trenger. Vi gir brukerne fleksibilitet og pasientene pålitelighet.

ProNeo ernæringssonde

Polyuretan - mykt og transparent, glatt overflate som forenkler innføringen av sonden



- Markering av antall cm**
· registrerer hvor mye av sonden som er ført inn
- Røntgentette strips**
· enkle å se på røntgen
- Preging på sonde**
· enkelt å finne diameteren på sonden
- Pasientetikett**
· dokumentasjon på innsetting av sonde
- Festplaster**
· for ømfintlig hud
- Fire French størrelser**
· 4 FR, 5 FR, 6 FR og 8 FR

ProNeo forlengelsessett

Polyuretan - mykt og transparent



- Slangeklemme for å unngå lekkasje under forberedelser/oppbevaring
- 120 cm forlengingsslange for mating ved hjelp av pumpe
- 30 cm forlengingsslange for mating ved hjelp av gravitasjon eller ved bolusmating

Agilia ProNeo enteral sprøytepumpe

ProNeo Agilia er en enteral sprøytepumpe som benyttes til enteral ernæring på nyfød- og spedbarnsavdelinger



ProNeo melkeflaskeadapter
· ventilert adapter for å trekke ut ernæring og væske fra en flaske



ProNeo hetteglassadapter
· ventilert adapter for å trekke opp medisin fra et hetteglass



ProNeo tilbehør

Komplett system med ENFit ProNeo sprøyter og ProNeo tilbehør

VarioFlaske adapter
· adapter for å trekke ut medisiner og væske fra en flaske
· mykt materiale som gjør den fleksibel i bruk



ProNeo opptreksstrå
· ren og hygienisk håndtering av medisiner og væske som trekkes opp fra flasker eller beholdere



ProNeo opptrekkskanyle
· hygienisk og nøyaktig opptrekk av små volum medisiner og væske fra ulike hetteglass
· integrert partikkelfilter for økt sikkerhet



ProNeo ENFit sprøyter, lavdose, for høy nøyaktighet ved små volum
· unngår dødvolum og gir nøyaktig måling spesielt tilpasset bruk på nyfød- og barneavdelinger
· størrelser: 1 ml, 2,5 ml, 5 ml




ProNeo ENFit sprøyter med ENFit kobling
· reduserer risikoen for feilkoblinger
· benyttes til gravitasjons- eller bolusmating eller for mating ved bruk av enteral ernæringspumpe



ProNeo sprøyteadapter
· for å koble to ENFit-sprøyter til hverandre for enkelt å blande eller overføre væske eller medisiner



ProNeo multifunksjonell sprøytehet
· til å beskytte væske og ernæring hvis stempelet i sprøyten trekkes ut
· fleksibel i bruk, passer til sprøyter på 20 ml og 60 ml

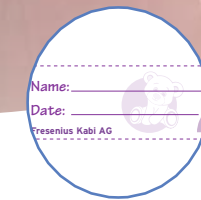

ProNeo sprøyteetiketter
· etiketter til å merke fylte sprøyter med pasientens identifikasjon