



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

CompoSeal Mobilea II

Schlauchschweißgerät für den
mobilen Einsatz





CompoSeal Mobilea II

Zuverlässige Technologie
für mobiles und effizientes Schlauchschweißen



Entwickelt für den
mobilen Einsatz



Intelligentes
Energiemanagement



Zuverlässige Technologie

CompoSeal Mobilea II

Ihre Vorteile auf einen Blick

Mobilea II vereint die Erfüllung höchster Ansprüche der professionellen Schlauchschweißung mit den Vorzügen einer fortschrittlichen Batterietechnologie



Entwickelt für den mobilen Einsatz

- Geringes Gewicht, Powerpack 760 g, Schweißzange 315 g
- Robustes Metallgehäuse
- Stoßabsorbierende Gummierung
- Umhängetasche
- Transportkoffer



Intelligentes Energiemanagement

- Moderne Lithium-Polymer Batterietechnologie
- Bis zu 1.000 Schweißungen pro Akkuladung an Standard Blutbeutelschläuchen
- Automatische Anpassung der Schweißzeit an die jeweilige Schlauchstärke



Zuverlässiger Betrieb

- Zugelassen für den Betrieb am punktierten Spender
- Leckageerkennung durch Prozessüberwachung
- Qualitativ hochwertige Schweißnähte unabhängig von der Batteriekapazität


CompoSeal Mobilea II

Schnelle und einfache Handhabung



Ergonomisch geformte
Handschweißzange

Robustes Powerpack mit
Lithium-Polymer Akku

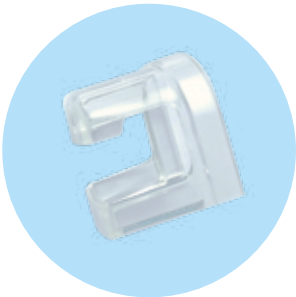

Splashguard - Spritzschutz
für Handschweißzangen
von Fresenius Kabi



Handschweißzange mit
Indikator-LED



Ladenetzteil

Handlicher Transportkoffer
für organisierte Aufbe-
wahrung der Komponenten



CompoSeal Mobilea II

Produktinformationen und technische Daten

Produktübersicht

CompoSeal Mobilea II - Komplett Set	VE*	Art.-Nr.
CompoSeal Mobilea II Set im Transportkoffer	1	9027011
CompoSeal Mobilea II - Einzelprodukte	VE*	Art.-Nr.
CompoSeal Mobilea II Powerpack	1	9027001
CompoSeal Mobilea II Ladenetzteil	1	9027031
CompoSeal Mobilea II Handschweißzange	1	9027021
CompoSeal Mobilea II Kabel Handschweißzange	1	9027041
CompoSeal Mobilea II Transportkoffer	1	9027051
CompoSeal Mobilea II Umhängetasche	1	9027070
SplashGuard, Spritzschutz	6	9029700

* Verpackungseinheit

Technische Daten

CompoSeal Mobilea II Set im Transportkoffer

Abmessungen	Länge: 395 mm Höhe: 295 mm Breite: 106 mm
Gewicht	2364 g

CompoSeal Mobilea II Powerpack

Abmessungen	Länge: 110 mm Höhe: 145 mm Breite: 52 mm
Gewicht	760 g

CompoSeal Mobilea II Ladenetzteil

Abmessungen	Länge: 65 mm Höhe: 130 mm Breite: 75 mm
Gewicht	270 g

CompoSeal Mobilea II Handschweißzange

Abmessungen	Länge: 215 mm Höhe: 30 mm Breite: 65 mm
Gewicht	315 g

CompoSeal Mobilea II Kabel Handschweißzange

Abmessungen	Länge: 1470 ¹ mm Höhe: 5 mm Breite: 5 mm
Gewicht	83 g

CompoSeal Mobilea II Transportkoffer

Abmessungen	Länge: 395 mm Höhe: 295 mm Breite: 106 mm
Gewicht	900 g

1) Länge von Stecker zu Stecker



wir helfen Menschen

Ihren Einsatz für Therapieerfolg und Lebensqualität möchten wir einfacher und sicherer machen und die Lebensqualität von Patienten und Pflegebedürftigen stetig steigern. Wir übernehmen Verantwortung für hochwertige, individuell abgestimmte Produkte und Dienstleistungen in den Leistungsbereichen:

Ernährung

Für die enterale Ernährung bieten wir Ihnen Trink- und Sondennahrungen sowie Supplemente. Das Programm für die parenterale Ernährung reicht von Mehrkammerbeuteln bis zu Einzelkomponenten wie Fettemulsionen, Aminosäuren, Vitaminen und Spurenelementen. Bei unseren therapieübergreifenden, bundesweiten Versorgungsstrukturen setzen wir uns höchste Qualitätsstandards.

Arzneimittel

Für die intravenöse Therapie kritisch kranker Menschen haben wir ein umfangreiches Produktprogramm von generischen Arzneimitteln wie Antibiotika und Anästhetika sowie Arzneimitteln für die Onkologie. Ihre vielfältigen Therapien unterstützen wir mit systematisch abgestimmten Applikationstechniken.

Infusionen

Unser Angebot umfasst Volumenersatz-, Träger- und Elektrolytlösungen sowie spezifische Lösungen für die Pädiatrie in modernen und anwendungsfreundlichen Primärbehältnissen. Wir unterstützen Ihre therapeutische Arbeit durch umfangreiche Dienstleistungen, wie eine computergestützte Kompatibilitätsdatenbank und eine breite wissenschaftliche Basis.

Medizinprodukte

Für Ernährung, Infusionen, Arzneimittel und Blutkomponenten bieten wir Ihnen präzise aufeinander abgestimmte Applikationstechnik und -systeme an. Das Produktprogramm wird durch die Urologie, die Tracheostomie und die moderne Wundversorgung abgerundet.



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Kundenberatung
61346 Bad Homburg
T 0800 / 788 7070
F 06172 / 686 8239
kundenberatung@fresenius-kabi.de
www.fresenius-kabi.de