

Transnasale Ein- und Mehrlumensonden

Bewährtes Portfolio mit einzigartiger Dreilumensonde





EINLUMIGE ERNÄHRUNGSSONDE AUS POLYURETHAN

Freka® Sonden

· zur gastralen und/oder intestinalen Ernährung und zur Dekompression

Ihr Nutzen:

- Feste „Steck- und Drehverbindung“ durch ENLock-Trichteransatz
- Einfache und sichere Sondenanlage

integrierter Spiralmandrin mit Oral-Tip-Ansatz
 · zum Einspritzen von Röntgenkontrastmittel oder Gleitflüssigkeit

flexible Polyurethan-Olive

- mit zwei Öffnungen bei Freka® Sonde CH 8, 10, 12
- mit fünf seitlich versetzten Austrittsöffnungen vor dem geschlossenen distalen Sondenende bei Freka® Ablaufsonde CH 15

optimale Lagekontrolle

- durch Röntgenkontraststreifen bei Freka® Sonde CH 6,5, 8, 10, 12 und 15
- durch Barium-Sulfat-Zusatz bei Freka® Sonde CH 8, 60 bzw. 80 cm

detaillierte Sondenbedruckung

- mit Angabe des Herstellers, Art.-Nr., CH-Größe, Sondenlänge und Abstandsmarkierung



Zubehör im Set:

- Freka® Pflaster zur Sondenfixierung

hohe Knickstabilität der Sonde

- zur Reduktion des Okklusionsrisikos
- maximaler Innendurchmesser bei minimalem Außendurchmesser

Produkt	Ansatz	Außen ø	Innen ø	Länge	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Freka® Paed-Sonde CH6,5	Trichter	2,2 mm	1,5 mm	50 cm	10	7980961	04533644	03.36.02.1009
Freka® Sonde CH 8	Luer-Lock	2,8 mm	1,9 mm	60 cm	10	7981101	02519798	03.36.02.1008
Freka® Sonde CH 8	ENLock	2,8 mm	1,9 mm	80 cm	10	7840052	09686074	in Bearbeitung
Freka® Sonde CH 8	ENLock	2,8 mm	1,9 mm	120 cm	10	7981693	09686080	in Bearbeitung
Freka® Sonde CH 10	ENLock	3,4 mm	2,4 mm	120 cm	10	7840152	09686097	in Bearbeitung
Freka® Sonde CH 12	ENLock	4,0 mm	2,9 mm	120 cm	10	7981823	09686105	in Bearbeitung
Freka® Sonde CH 15	ENLock	4,5 mm	3,5 mm	120 cm	10	7980113	10006392	in Bearbeitung*
Freka® Sonde CH 15	Trichter	4,5 mm	3,5 mm	120 cm	10	7980111	02519775	03.36.02.1002
Freka® Ablaufsonde CH15	Trichter	4,5 mm	3,5 mm	100 cm	10	7980115	10006386	in Bearbeitung*

*Verfügbar ab: Q4/2013



Magen- / Dünndarmsonden für die Pädiatrie:

Freka® Sonde
 CH 8, 80 cm
 CH 8, 60 cm
 CH 6,5, 50 cm




ZWEILUMIGE ERNÄHRUNGSSONDE FÜR KRITISCH KRANKE AUS POLYURETHAN

Freka® EasyIn

- zur frühen intestinalen Ernährung und gleichzeitigen gastralen Dekompression
- z. B. bei kritisch Kranken mit traumatisch oder postoperativ bedingten Passagestörungen (Magenatonie, Störungen der Magenentleerung unter Langzeitbeatmung, Magenausgangstenosen etc.)

Ihr Nutzen:

- Anlage durch den Arbeitskanal eines Standardendoskops (2,8 mm)
- Patientenindividuelle Positionierung beider Sonden möglich

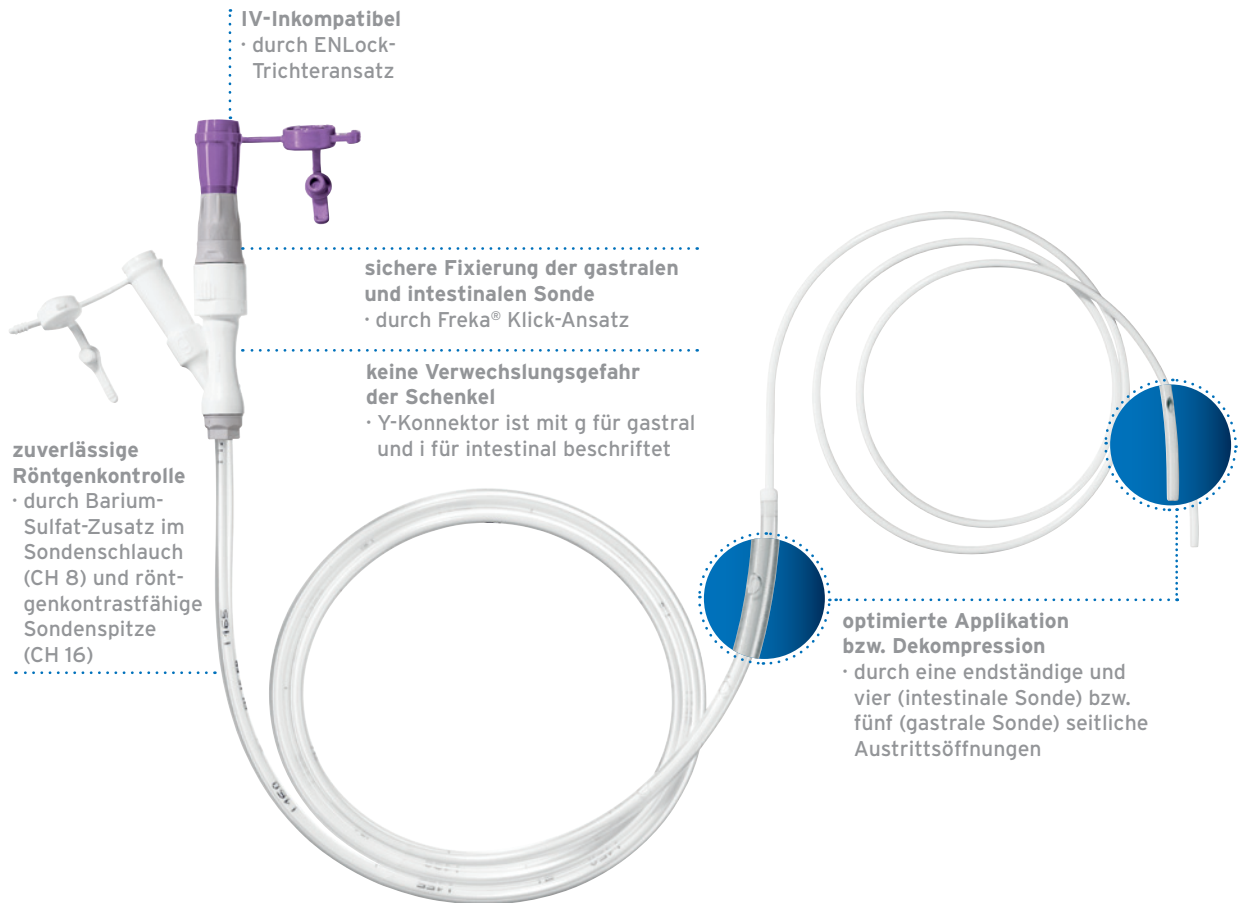

Zubehör im Set:

- Blauer Umleitkatheter
- Freka® MCT-Öl-Ampullen
- Freka® Pflaster zur Sondenfixierung
- Freka® Connect ENLock, 10 ml

Produkt	Ansatz	Außen ø	Innen ø	Länge	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Freka® EasyIn					1	7755012	09686128	in Bearbeitung
Intestinale Sonde	ENLock	2,6 mm	1,8 mm	270 cm				
Gastrale Sonde	Trichter	5,3 mm	4,0 mm	100 cm				
Freka Endolumina								
Intestinale Sonde	ENLock	2,6 mm	1,8 mm	270 cm	5	7755032	09686134	

Ausführliche Informationen zum Produkt entnehmen Sie bitte der entsprechenden Gebrauchsinformation.



DREILUMIGE ERNÄHRUNGSSONDE FÜR KRITISCH KRANKE AUS POLYURETHAN

Freka® Trelumina

- zur frühen intestinalen Ernährung und gleichzeitigen gastralen Dekompression
- z. B. bei kritisch Kranken mit traumatisch oder postoperativ bedingten Passagestörungen (Magenatonie, Störungen der Magenentleerung unter Langzeitbeatmung, Magenausgangsstenosen etc.)

Ihr Nutzen:

- Sofortige transnasale Anlage des Komplettsondensystems
- Druckausgleich durch zusätzliches Belüftungslumen

integrierter, teflonbeschichteter Spiralmandrin mit Oral-Tip-Ansatz
· zum Einspritzen von Röntgenkontrastmittel/Gleitflüssigkeit

Intestinales Ernährungslumen mit ENLock-Trichteransatz CH 9

Gastraler universeller Trichteransatz CH 16
· Dekompression und Drainage

zusätzliches Belüftungslumen
· verhindert das Ansaugen der Mageninnenwand, das Kollabieren des Sondenschlauches, sowie Mikroläsionen

griffige Sondenspitze mit Kunststoff-Zieholive

Zubehör im Set:

- Freka® MCT-Öl-Ampullen
- Freka® Pflaster zur Sondensicherung
- Freka® Connect ENLock, 10 ml

sichere Röntgenkontrolle
· durch röntgenkontrastgebende intestinale Sonden (Barium-Sulfat-Zusatz) und Röntgenkontraststreifen in gastralen Sonden

optimierte Applikation bzw. Dekompression
· durch eine endständige und zwei (intestinale Sonde) bzw. fünf (gastrale Sonde) seitliche Austrittsöffnungen

Produkt	Ansatz	Außen ø	Innen ø	Länge	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Freka® Trelumina FR 16/9				150 cm	1	7750912	09686111	in Bearbeitung
Intestinales Ernährungslumen	ENLock	2,9 mm	1,9 mm	150 cm				in Bearbeitung
Gastrales Absauglumen	Trichter	5,3 mm	4,1 mm	95 cm				
Gastrales Belüftungslumen	IV-Inkompatibel		1,2 mm	95 cm	100	9000764	09685956	03.99.01.3041

Ausführliche Informationen zum Produkt entnehmen Sie bitte der entsprechenden Gebrauchsinformation.



EINLUMIGE ERNÄHRUNGSSENDEN AUS SILIKONKAUTSCHUK

Freka® Sil-Sonden

· zur gastralen und/oder intestinalen Ernährung und zur Dekompression

Ihr Nutzen:

- Patientenkomfort
- Reduziertes Fremdkörpergefühl durch flexibles und weiches Silikon



integrierter Spiralmadrin mit Oral-Tip-Ansatz
· zum Einspritzen von Röntgenkontrastmittel oder Gleitflüssigkeit

gewebefreundliche, röntgenkontrastgebende Silikonkautschuksonde
· mit Abstandsmarkierungen

Zubehör im Set:

- Freka® MCT-Öl-Ampullen
- Freka® Pflaster zur Sondenfixierung

Produkt	Ansatz	Außen ø	Innen ø	Länge	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Freka® Sil-Sonde CH 7,6	Luer-Lock	2,5 mm	1,6 mm	130 cm	5	7980301	03081051	03.36.02.1010
Freka® Sil-Sonde CH 13	Luer-Lock	4,3 mm	2,9 mm	120 cm	10	7980941	07292299	03.36.02.1001
Freka® Sil-Sonde CH 16	Trichter	5,3 mm	3,5 mm	100 cm	10	7980951	07292307	03.36.02.0017

Zubehör - Transnasale Sonden

Produkt	VE (St.)	Art.-Nr.:	PZN	Produkt	VE (St.)	Art.-Nr.:	PZN
Freka® Y-Verbindung	12	7989951	4096741	Freka® Connect 10 ml, ENLock	100	9000764	9685956
Freka® Endo-Madrin, 300 cm	1	7980321	3225165	Freka® Connect 20 ml, ENLock	100	9000762	9685962
Freka® Pflaster zur Sondenfixierung	50	7981907	1850261	Freka® Connect 60 ml, ENLock	50	9000763	9685979
Freka® Adapter für Luer-Spritzen	100	7981981	2098569	Freka® Orale Kappe	30	7981369	4653673
Freka® Universal Trichteradapter	15	7981971	1850338	Freka® Orale Kappe, steril	30	7981372	4653696
Freka® Stufenadapter	15	7751561	0884045	Freka® ENLock Kappe	30	7981375	4653756
Freka® Sondenverlängerung, 30 cm	3	798193W	1850344	Freka® ENLock Kappe, steril	30	7981374	4653762
Freka® MCT-Öl-Ampullen	10	3087364	1850255	Freka® Connect 1 ml, ENLock	30	9000765	10050134
Einmalspritze steril, 20 ml	10	7751611	0987526	Freka® Connect 2,5 ml, ENLock	30	9000766	10050128
Einmalspritze steril, 50 ml	10	7751621	0987503	Freka® Connect 5 ml, ENLock	30	9000767	10050111
Freka® Verschlussstopfen für Sonden	15	798136Y	1850350				

Ihren Einsatz für Therapieerfolg und Lebensqualität möchten wir einfacher und sicherer machen und die Lebensqualität von Patienten und Pflegebedürftigen stetig steigern. Wir übernehmen Verantwortung für hochwertige, individuell abgestimmte Produkte und Dienstleistungen in den Leistungsbereichen:

Ernährung

Für die enterale Ernährung bieten wir Ihnen Trink- und Sondennahrungen sowie Supplemente. Das Programm für die parenterale Ernährung reicht von Mehrkammerbeuteln bis zu Einzelkomponenten wie Fettemulsionen, Aminosäuren, Vitaminen und Spurenelementen. Bei unseren therapieübergreifenden, bundesweiten Versorgungsstrukturen setzen wir uns höchste Qualitätsstandards.

Arzneimittel

Für die intravenöse Therapie kritisch kranker Menschen haben wir ein umfangreiches Produktprogramm von generischen Arzneimitteln wie Antibiotika und Anästhetika sowie Arzneimitteln für die Onkologie. Ihre vielfältigen Therapien unterstützen wir mit systematisch abgestimmten Applikationstechniken.

Infusionen

Unser Angebot umfasst Volumenersatz-, Träger- und Elektrolytlösungen sowie spezifische Lösungen für die Pädiatrie in modernen und anwendungsfreundlichen Primärbehältnissen. Wir unterstützen Ihre therapeutische Arbeit durch umfangreiche Dienstleistungen, wie eine computergestützte Kompatibilitätsdatenbank und eine breite wissenschaftliche Basis.

Medizinprodukte

Für Ernährung, Infusionen, Arzneimittel und Blutkomponenten bieten wir Ihnen präzise aufeinander abgestimmte Applikationstechnik und -systeme an. Das Produktprogramm wird durch die Urologie, die Tracheostomie und die moderne Wundversorgung abgerundet.

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Kundenberatung
61346 Bad Homburg
T 0800 / 788 7070
F 06172 / 686-8239
kundenberatung@fresenius-kabi.de
www.fresenius-kabi.de

wir helfen Menschen