

## Ambix activ

Die mobile Infusionspumpe für die parenterale Ernährung



AMBIX ACTIV

## Ambix activ - für ein aktives Leben!



Die Ambix activ ist eine kleine, leichte, mobile Pumpe für die parenterale Ernährung.

Unabhängig, welche parenterale Ernährungstherapie angewendet wird oder wo sie eingesetzt wird – die Ambix activ ist einfach, selbstverständlich sicher und benutzerfreundlich. Sie sind immer mobil.

### Einfach ...

- ... zu programmieren – alle Parameter auf einen Blick
- ... zu tragen – durch ein hochwertiges Tragesystem – den activ Rucksack in 2 unterschiedlichen Größen
- ... frei sein – durch einen 40-Stunden-Akku

### Sicher ...

- ... durch die innovative Ambix Sicherheitsklemme zur Vermeidung eines unbeabsichtigten Free-Flows
- ... durch verschiedene Tastatursperre-Optionen
- ... durch die notwendigen Alarm-Optionen
- ... durch den integrierten Knickschutz und einen knickfesten Schlauch (ambulantes Set)


### Benutzerfreundlich ...

- ... leicht
- ... leise
- ... kleine Abmessungen
- ... regulierbare Alarmintensität
- ... mit verschiedenen Programmen: Kontinuierlich, Volumen/Zeit und TPN (Total Parenteral Nutrition)


AMBIX ACTIV

# Applikationssysteme

## Activ Überleitsystem für den ambulanten Gebrauch

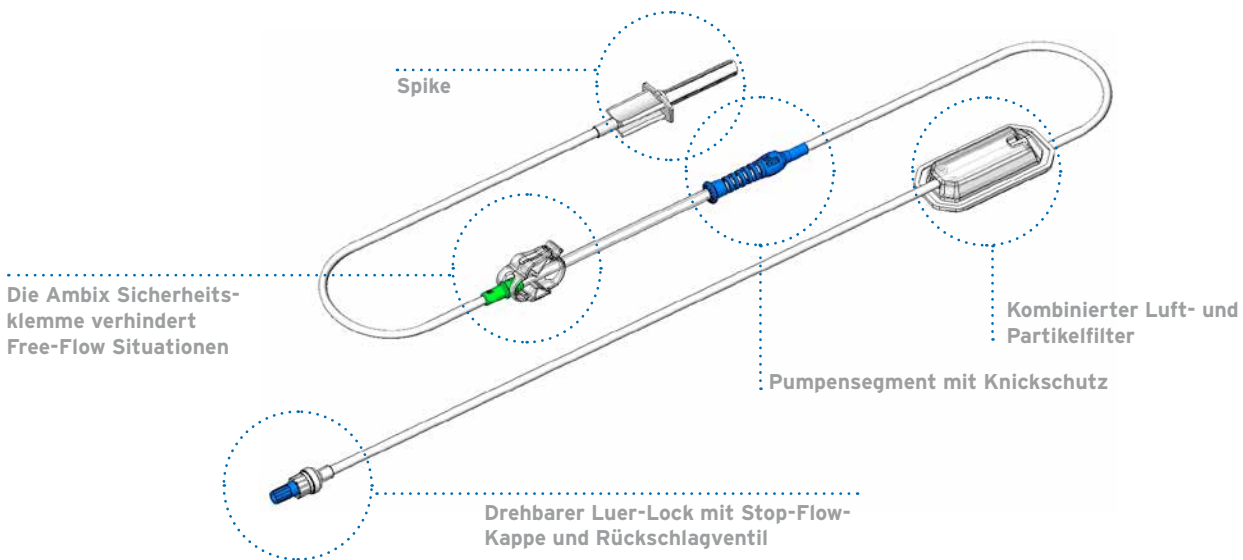

## Activ Überleitsystem für den stationären Gebrauch

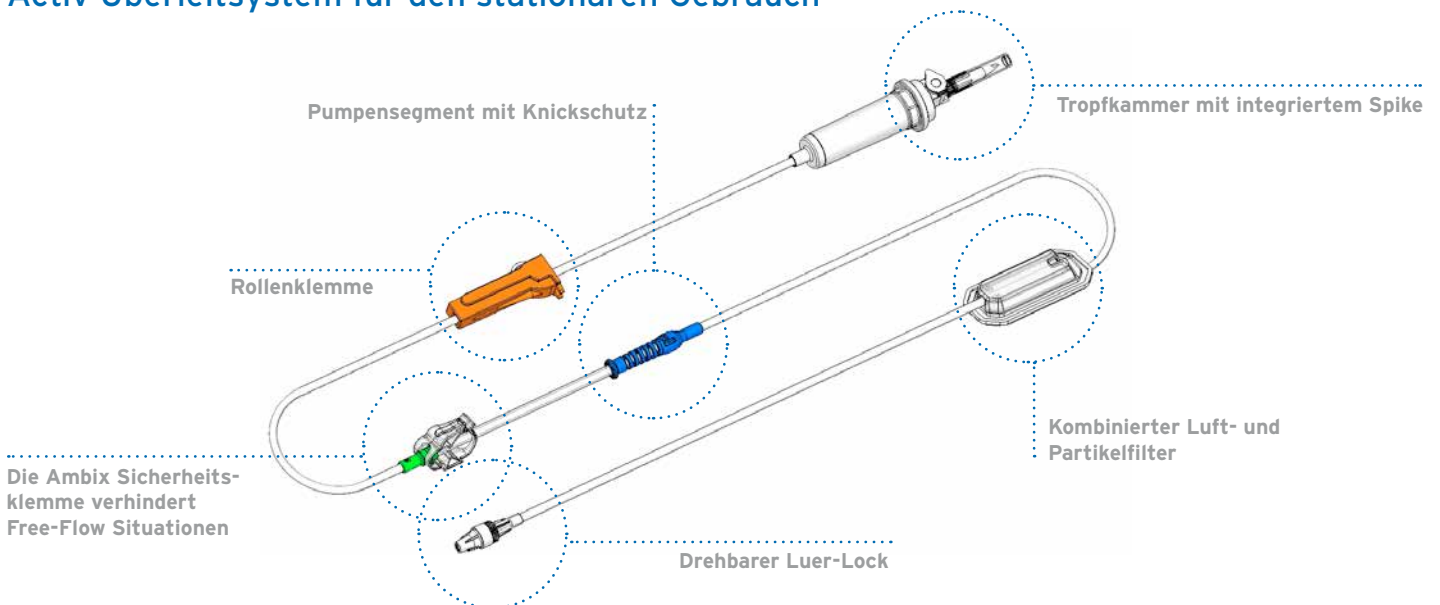

AMBIX ACTIV

## Hochwertige Tragesysteme für die parenterale Ernährung



activ Rucksack

activ Rucksack mini



### activ Rucksack

- robust und komfortabel
- für Infusionslösungen bis 5 l geeignet
- universelles Haltesystem für Infusionsbeutel
- 3 verschiedene Tragemöglichkeiten
- sicheres und einfaches Einlegen der Pumpe
- große Außentasche für Zubehör oder persönliche Dinge
- Bedienung der Pumpe über das Außenfenster, ohne den Rucksack öffnen zu müssen

### activ Rucksack mini

- leicht und klein, für Kinder konzipiert
- für Infusionslösungen bis 1,5 l geeignet
- sicheres und einfaches Einlegen der Pumpe
- verstellbare Gurte ermöglichen ein komfortables Tragegefühl bei Kindern und Erwachsenen
- 2 verschiedene Tragemöglichkeiten, plus ein zusätzlicher Gurt für die Anbringung an den Kinderwagen
- Bedienung der Pumpe über das Außenfenster, ohne den Rucksack öffnen zu müssen

**AMBIX ACTIV**

# Produktinformationen

**Merkmale**

- 4 Programme:  
kontinuierlich, Volumen über Zeit, TPN, intermittierend
- Spezielles Pumpensegment mit integriertem Knickschutz
- Okklusionserkennung vor und nach dem Fördermechanismus
- Zielvolumen-Voralarm
- Vorfüll-Funktion
- Einfaches Menü
- Einstellbares Druckniveau
- Einstellbare KVO-Rate
- Einstellbare Zeitintervalle zwischen zwei Alarmen

**Technische Daten**

Genauigkeit	5 % nominal
Infusionsvolumen	0 - 9.999 ml
Infudiertes Volumen	0 - 9.999 ml
Infusionszeit	5 min - 24 h
Anstiegs-/Abstiegsperiode	0 min - 2 h 30 min
Dosis	5 min - 24 h
Anzahl der Intervalle	1 - 24
Intervallzeit	10 min - 24 h
Förderrate	10 - 600 ml/h
KVO-Rate	0 - 10 ml/h
Abmessungen	132 x 120 x 45 mm (Pumpe) 146 x 162 x 115 mm (Halter)
Gewicht	550 g (Pumpe) 500 g (Halter)
Display	LCD
Speicher	Historie von 500 Ereignissen
Stromquelle	Eingebauter, ladbarer Akku NiMh 4,8 V, 1,8 Ah
Lebensdauer Akku	5.000 ml (40 h bei 125 ml/h)
Spannungsversorgung:	100 - 230 V/50 - 60 Hz



Bestellinformation	Verpackung	Art.-Nr.	PZN-Nr.
Ambix activ Infusionspumpe	1 x 1	2892120	6683543
Ambix activ ambulantes Set	15 x 1	2892095	6459596
Ambix activ stationäres Set	15 x 1	2892098	6459716
Ambix activ Rucksack	1 x 1	2892091	5992503
Ambix activ Rucksack Mini	1 x 1	2892101	6472214
Ausflusstopventil	100 x 1	04302260485	08823511

Ihren Einsatz für Therapieerfolg und Lebensqualität möchten wir einfacher und sicherer machen und die Lebensqualität von Patienten und Pflegebedürftigen stetig steigern. Wir übernehmen Verantwortung für hochwertige, individuell abgestimmte Produkte und Dienstleistungen in den Leistungsbereichen:

#### **Ernährung**

Für die enterale Ernährung bieten wir Ihnen Trink- und Sondennahrungen sowie Supplemente. Das Programm für die parenterale Ernährung reicht von Mehrkammerbeuteln bis zu Einzelkomponenten wie Fettemulsionen, Aminosäuren, Vitaminen und Spurenelementen. Bei unseren therapieübergreifenden, bundesweiten Versorgungsstrukturen setzen wir uns höchste Qualitätsstandards.

#### **Arzneimittel**

Für die intravenöse Therapie kritisch kranker Menschen haben wir ein umfangreiches Produktprogramm von generischen Arzneimitteln wie Antibiotika und Anästhetika sowie Arzneimitteln für die Onkologie. Ihre vielfältigen Therapien unterstützen wir mit systematisch abgestimmten Applikationstechniken.

#### **Infusionen**

Unser Angebot umfasst Volumenersatz-, Träger- und Elektrolytlösungen sowie spezifische Lösungen für die Pädiatrie in modernen und anwendungsfreundlichen Primärbehältnissen. Wir unterstützen Ihre therapeutische Arbeit durch umfangreiche Dienstleistungen, wie eine computergestützte Kompatibilitätsdatenbank und eine breite wissenschaftliche Basis.

#### **Medizinprodukte**

Für Ernährung, Infusionen, Arzneimittel und Blutkomponenten bieten wir Ihnen präzise aufeinander abgestimmte Applikationstechnik und -systeme an. Das Produktprogramm wird durch die Urologie, die Tracheostomie und die moderne Wundversorgung abgerundet.