



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Careflex[®] Duo

Der optimierte Spüllösungsbeutel mit
Doppelport - flexibel, sicher und bewährt





Einsteck-Port



Care-Lock®-Port



Careflex® Duo - der optimierte Spüllösungsbeutel mit Doppelport

Ihr Nutzen auf einen Blick

Der optimierte Spüllösungsbeutel Careflex® Duo von Fresenius Kabi wurde mit einem Doppelport ausgestattet und ist so **flexibel** und selbstverständlich **sicher** im stationären und operativen Alltag nutzbar. In Kombination mit den **bewährten** Eigenschaften der bekannten Spüllösungsbeutel, ermöglicht Careflex® Duo einen anwenderfreundlichen und zuverlässigen Einsatz in der Spüllösungstherapie.



Optimiert für ein hohes Maß an FLEXIBILITÄT

- Kombination aus Einsteck- und Schraubport an einem Beutel für hohe Arbeitsflexibilität
- Einsetzbar bei vielen chirurgischen Eingriffen
- Vereinfacht den Bestellprozess und optimiert die Lagerhaltung




Gute Produkteigenschaften für ein Plus an SICHERHEIT


- Originalitätsverschluss - abgebrochene Verschlusskappe am Originalitätsverschluss zeigt, dass das Produkt bereits verwendet wurde
- Hohe Transparenz der Folie ermöglicht eine gute optische Kontrolle
- Selbstverschließende Membran an beiden Ports

Careflex® Duo - der optimierte Spüllösungsbeutel mit Doppelport Handhabung

Care-Lock®-Port

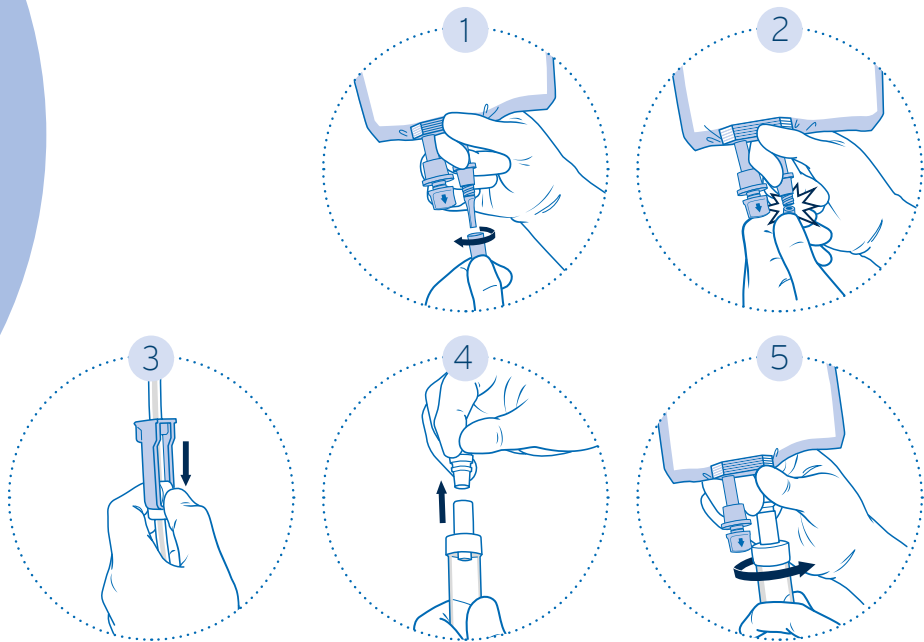

Einstech-Port

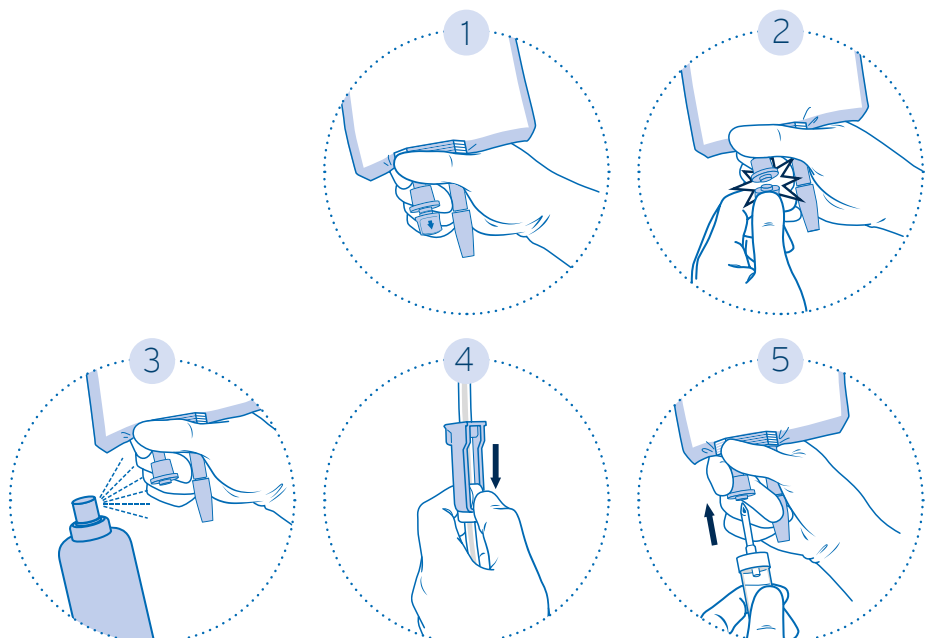



Care-Lock®-Port

- Kompatibel mit Care-Lock®-Überleitsystemen
- Die feste Schraubverbindung verhindert eine ungewollte Trennung des Überleitsystems vom Beutel
- Eine Desinfektion der Membran unmittelbar nach Entfernen des Originalitätsverschlusses ist nicht notwendig
- Kein Auslaufen der Spüllösung nach Entfernen des Überleitsystems aufgrund einer selbstabdichtenden Membran
- Eine Schutzkappe verhindert Verschmutzung und das ungewollte Öffnen des Originalitätsverschlusses
- Sicherheitssystem: Stichverletzungen und damit verbundene Infektionsrisiken sind reduziert (gemäß TRBA 250)

Einstech-Port

- Kompatibel mit Dorn-Überleitsystemen
- Gute Wiederverschlusseigenschaften der Portmembran beim Entfernen des Überleitsystems und damit kein Auslaufen der Spüllösung

3 Bekannt und BEWÄHRT

- Beutel aus mehrschichtiger Folie
- PVC-, Latex-, DEHP-frei
- Umweltfreundlich: keine Freisetzung von Dioxinen oder Salzsäure beim Recycling
- Stabile, integrierte Aufhängösen erleichtern den Gebrauch und stellen die optimale Entleerung des Beutels sicher
- Erwärmung im Wärmeschrank bei 37 °C möglich

Careflex® Duo - DER OPTIMIERTE SPÜLLÖSUNGSBEUTEL MIT DOPPELPORT

Lösungen im Careflex® Duo

Beutelgrößen

1500 ml



3000 ml



5000 ml



Bestellinformationen

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN	Volumen (ml)
Purisole® SM verdünnt	6x1	Karton	F2577681	11183446	1500
Purisole® SM verdünnt	4x1	Karton	F2577161	11183452	3000
Purisole® SM verdünnt	2x1	Karton	F2577201	11183469	5000

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN	Volumen (ml)
NaCl 0,9% Fresenius	4x1	Karton	F1339161	11183417	3000
NaCl 0,9% Fresenius	2x1	Karton	F1339201	11183423	5000

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN	Volumen (ml)
Ringer Fresenius	6x1	Karton	F2614681	11183475	1500
Ringer Fresenius	4x1	Karton	F2614161	11183481	3000
Ringer Fresenius	2x1	Karton	F2612201	11183498	5000

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN	Volumen (ml)
Glycin 1,5%	2x1	Karton	F2566201	11183363	5000

* Verpackungseinheit



wir helfen Menschen

Ihren Einsatz für Therapieerfolg und Lebensqualität möchten wir einfacher und sicherer machen und die Lebensqualität von Patienten und Pflegebedürftigen stetig steigern. Wir übernehmen Verantwortung für hochwertige, individuell abgestimmte Produkte und Dienstleistungen in den Leistungsbereichen:

Ernährung

Für die enterale Ernährung bieten wir Ihnen Trink- und Sondennahrungen sowie Supplemente. Das Programm für die parenterale Ernährung reicht von Mehrkammerbeuteln bis zu Einzelkomponenten wie Fettemulsionen, Aminosäuren, Vitaminen und Spurenelementen. Bei unseren therapieübergreifenden, bundesweiten Versorgungsstrukturen setzen wir uns höchste Qualitätsstandards.

Arzneimittel

Für die intravenöse Therapie kritisch kranker Menschen haben wir ein umfangreiches Produktprogramm von generischen Arzneimitteln wie Antibiotika und Anästhetika sowie Arzneimitteln für die Onkologie. Ihre vielfältigen Therapien unterstützen wir mit systematisch abgestimmten Applikationstechniken.

Infusionen

Unser Angebot umfasst Volumenersatz-, Träger- und Elektrolytlösungen sowie spezifische Lösungen für die Pädiatrie in modernen und anwendungsfreundlichen Primärbehältnissen. Wir unterstützen Ihre therapeutische Arbeit durch umfangreiche Dienstleistungen, wie eine computergestützte Kompatibilitätsdatenbank und eine breite wissenschaftliche Basis.

Medizinprodukte

Für Ernährung, Infusionen, Arzneimittel und Blutkomponenten bieten wir Ihnen präzise aufeinander abgestimmte Applikationstechnik und -systeme an. Das Produktprogramm wird durch die Urologie, die Tracheostomie und die moderne Wundversorgung abgerundet.